

AIXIN MEDICAL
GEBRUIKERSHANDLEI
DING

AX-2006
Kopieermachine


Beschrijving:

De AX-2006-duplicatiemachine wordt gebruikt voor het smelten en mengen van duplicatiegel in tandtechnische laboratoria voor het vervaardigen van afdrukken. Deze machine is een verbeterde versie van de AX-2002-duplicatiemachine; het digitale besturingssysteem maakt de bediening veel eenvoudiger.

Technische gegevens:

Spanning	AC 220 V / 110 V 50 Hz / 60 Hz $\pm 10\%$
Toerental	40 tpm
Vermogen	800 W
Inhoud	3 l - 5 l
Afmetingen	37 × 29 × 52 (cm)

Schema:

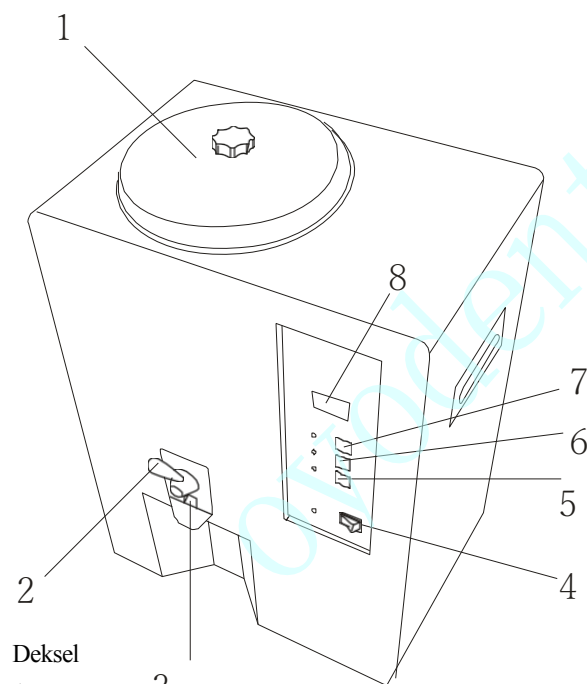

Deksel

1. Stopcontactschakelaar aanschaffen
2. Gel-uitgang
3. Stroom
4. Mixknop
5. Knop voor warmtebehoud
6. Verwarmingsknop
7. Temperatuur

Instructies:

1. Pak de verpakking uit en controleer of alle accessoires aanwezig zijn. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Doe 3 kg of meer duplicatiegel in de tank (zorg ervoor dat de gel in kleine stukjes van ongeveer 1 cm is gesneden).
3. Steek de stekker in het stopcontact; het stroomlampje gaat branden.
4. Schakel de stroom in; de temperatuurindicator geeft de temperatuur in de tank weer. Druk op de knop 'Verwarmen'; de verwarmingsindicator gaat branden en het apparaat begint te verwarmen. De temperatuur stijgt tot 88 °C, waarna de warmtebehoudfunctie in werking treedt. Het verwarmingslampje gaat uit en het warmtebehoudindicator gaat branden. Daarna daalt de temperatuur en blijft deze tussen 48 °C en 59 °C. Het apparaat begint op gemiddelde snelheid te mengen wanneer de temperatuur tussen 28 °C en 59 °C ligt, en op volle snelheid wanneer de temperatuur boven de 60 °C komt.
5. Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
6. Druk op elk gewenst moment op de knop 'Warmhoudfunctie' om het verwarmen te stoppen en de warmhoudfunctie te starten. Druk nogmaals op deze knop om de warmhoudfunctie te stoppen.
7. Druk op de knop 'Mix' terwijl de knoppen 'Heat' en 'Heat preservation' niet zijn ingedrukt om de motor te testen.
8. Zet de schakelaar voor de geluitloop aan om de duplicatiegel te gebruiken.
9. Controleer voordat u de machine in gebruik neemt of er nog gel in de tank zit en verwijder deze met een lepel uit de tank.

Waarschuwingen:

1. Dit is een elektrisch verwarmingsapparaat; de duplicatiegel kan zeer heet worden. Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
2. Gebruikers dienen het schema en de functie van elke knop te bestuderen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
3. Er kan maximaal 3 kg duplicatiegel in de machine worden gedaan. De machine mag niet worden gestart als er geen duplicatiegel in de tank zit.
4. Begin niet met mengen als er gestolde duplicatiegel in de tank zit. De gel moet uit de tank worden verwijderd en in stukjes worden gesneden voordat deze opnieuw kan worden gebruikt. Pas wanneer meer dan 50% van de gel is gesmolten, mag de mixer worden gestart; anders kan de motor doorbranden.
5. Controleer de maximale temperatuur voordat u de machine opnieuw start.

Accessoires:

Gebruikershandleiding	1 stuk
Netsnoer	1 stuk
Zekeringbuis (5 A)	2 stuks