

MULTIFUNCTIONELE -VERWARMING

GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL: MH-01

VERSIENUMMER: 2020

PUBLICATIEDATUM: AUGUSTUS 2020



INHOUDTS

01-PRODUCTBESCHRIJVING

02-TOEPASSINGSGEBIED

03-PRODUCTPRESTATIES

04-OPBOUW EN SAMENSTELLING

05-SCHEMA

06-PRODUCTSPECIFICATIES

07-GEBRUIKSAANWIJZING

08- GEBRUIKSAANWIJZING

**ONDERHOUD,
09-EN OPSLAGWIJZE**

10- STORINGSANALYSE

11-VOORZORGSMaatregelen en veiligheidswaarschuwing 12- AANSLUITING

1 【PRODUCT INTRODUCTION】

Dit product wordt gekenmerkt door snelle opwarming, een lange levensduur, een compact en fraai uiterlijk, is gemakkelijk te vervoeren en op te bergen, eenvoudig te bedienen, heeft een laag energieverbruik, een hoog rendement en zorgt voor een langdurige constante temperatuur.




2 【SCOPE OF APPLICATION】




Dit apparaat is geschikt voor het verwarmen van medische harsen, anesthetica, injectiemondstukken, enz.


3 【PRODUCT PERFORMANCE】

Deze verwarming is ontworpen met verschillende verwarmingsplaten voor het verwarmen van materialen van verschillende soorten en uiterlijke kenmerken, die op elk moment naar behoefte kunnen worden vervangen, en de verwarmingstemperatuur kan willekeurig worden aangepast, met nauwkeurige en intelligente temperatuurregeling en een constante temperatuur.

4 【STRUCTURE AND COMPOSITION】

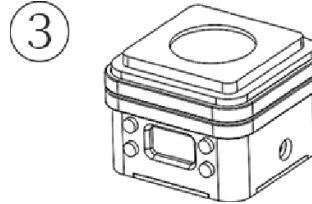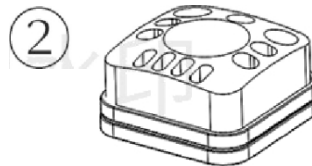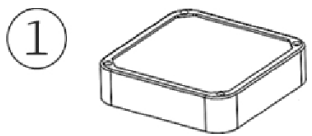- 

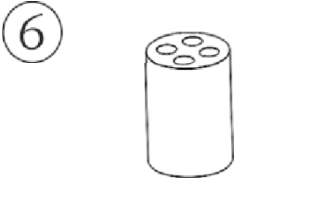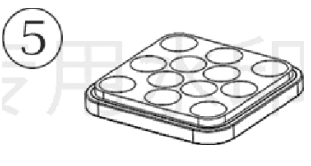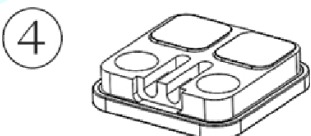

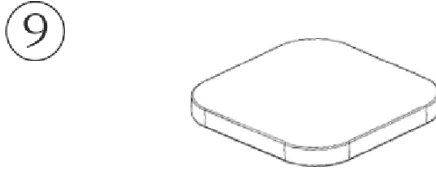
- 1 Filterkap

2 Externe temperatuursensor

3 Het verwarmingselement

4 Geïntegreerde bak met hars en harscapsule

5 Patch-lade


6 Anesthesie-tray

7 Stroomadapter

8 Externe temperatuursensor

9 Plaat van gehard glas

5【SCHEMATIC】

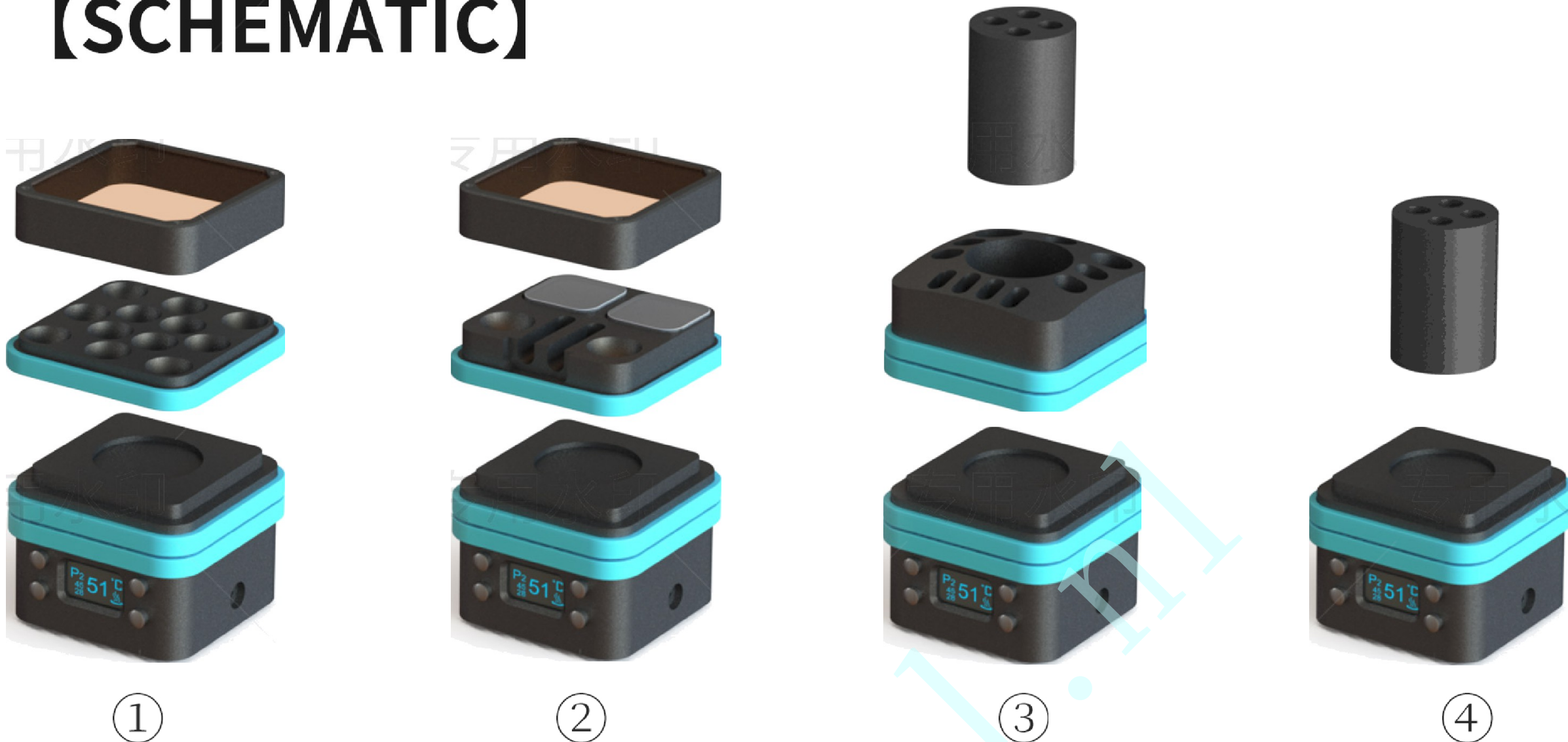

6 PRODUCT SPECIFICATIONS

voer in:	220 V 0 Hz 60 Hz	Temperatuur in de gebruiksomgeving:	5 °C 35 °C
Uitgang:	24 VDC 2 A	temperatuurbereik:	RT+5 °C 100 °C
monitorfrequentie:	26 W	Temperatuurregelbereik:	«<+0,3 °C
Temperatuurmodus (P):	36 °C, 45 °C, 70 °C, 100 °C	Afmetingen behuizing (L x B x H):	75 mm x 75 mm x 60 mm
Opwarmtijd in temperatuurmodus:	20" 50" 2?/t? 3f?50"	nettogewicht:	1,1 TKG
Schaduwbereik:	4500 nm		

7【OPERATION GUIDE】

1. Plaats de behuizing van de verwarmingsregeleenheid op een vlak oppervlak;

2. Steek de DC-stekker van de voedingsadapter in de DC-voedingsaansluiting van de bedieningskast van de verwarming en steek vervolgens het andere uiteinde van de voedingsadapter in het externe stopcontact; op dat moment wordt de stroom ingeschakeld, brandt het verwarmingslampje op het display continu en staat de verwarming klaar om te verwarmen;
3. Druk op de toets voor het verhogen van de temperatuurinstelling/de om de gewenste verwarmingstemperatuur in te stellen, of druk op de toets voor het selecteren van de temperatuurbereikmodus de gewenste verwarmingstemperatuur in te stellen, of druk op de toets voor het selecteren van de temperatuurbereikmodus om de instelling vast te leggen.
4. Druk op de verwarmingsknop; het verwarmingselement begint te verwarmen en het verwarmingslampje begint te knipperen. Druk nogmaals op de verwarmingsknop; het verwarmingselement schakelt de verwarming uit en het verwarmingslampje stopt met knipperen en blijft continu branden. De standaardtemperatuur van het verwarmingselement is de temperatuur die bij het laatste gebruik is ingesteld;
5. Wanneer de temperatuur de vooraf ingestelde waarde bereikt, geeft de verwarming automatisch een geluidssignaal af en stopt de verwarming met verwarmen om een constante temperatuur te handhaven.
6. Bij ononderbroken stroomvoorziening zal de verwarming de vooraf ingestelde temperatuur altijd constant houden.
7. Steek de externe temperatuursensor in de aansluiting van de behuizing en laat het andere uiteinde het te meten oppervlak raken. Op dat moment wordt de gemeten temperatuur weergegeven linksonder op het scherm.

8 【INSTRUCTIONS FOR USE】

1. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
2. Wanneer dit product in koude gebieden wordt gebruikt, is het normaal dat de totale opwarmtijd met 1 tot 3 minuten wordt verlengd.
3. Vermijd het per ongeluk indrukken van de knoppen van dit product door de zwaartekracht, om schade aan de knoppen te voorkomen.



1. Weergave temperatuurmodus: constante dagweergave
2. Weergave van de externe temperatuurregeling
3. Weergave verwarmingstemperatuur
4. Weergave verwarmingstemperatuur
5. Weergave temperatuureenheid
6. De toets voor het selecteren van de temperatuurbereikmodus

7. Verwarming aan/uit
8. Weergave
9. Knop om de temperatuur te verlagen.
10. Knop voor temperatuurverhoging
11. Aansluiting voor temperatuurvoeler

9 【MAINTENANCE, AND STORAGE METHOD】

1. De verwarmingselement en de bak kunnen worden geschrobd en gedesinfecteerd met wattenbolletjes gedrenkt in alcohol. Dompel het gehele apparaat niet onder in enige vloeistof voor reiniging en desinfectie. Sterilisatie bij hoge temperatuur en onder hoge druk is ten strengste verboden.
2. Nadat het oppervlak grondig aan de lucht is gedroogd, wordt de gereinigde machine in de doos geplaatst, en moet op een droge en goed geventileerde plaats worden bewaard. Plaats het niet op een vochtige en stoffige plaats, om kortsluiting te voorkomen in de besturingsprintplaat in het verwarmingselement
3. Plaats dit product niet op plaatsen met corrosieve gassen of sterke magnetische veldstoringen, en houd het uit de buurt van verwarming, vuur en alle andere warmtebronnen om sensorstoringen te voorkomen.
4. Vermijd bij het inpakken van de doos het langdurig indrukken van de toetsen van het verwarmingselement, aangezien dit kan leiden tot defecten aan de toetsen

10 【FAULT ANALYSIS】

STORINGSVERSCIJINSEL	ANALYSE	AANPAK
Het display licht niet op	Er is geen stroom aangesloten, storing in het circuit	Controleer de stroomtoevoer, sluit de stekker opnieuw aan; als het scherm niet aangaat, neem dan contact op met de leverancier of fabrikant
Het display knippert	storing in het circuit	Neem contact op met leveranciers of fabrikanten
De module wordt niet warm	Storing in de verwarming	Neem contact op met leveranciers of fabrikanten
De toets werkt niet	De knop werkt niet	Contact met leveranciers of fabrikanten

11 【PRECAUTIONS】 AND 【SAFETY WARNING】

VOORZORGSMAAATREGELEN

1. Zorg ervoor dat het verwarmingselement en de verschillende verwarmingsbakken tijdens het gebruik niet worden bekrast;
2. Als het te verwarmen composietmateriaal aan het verwarmingselement of de verwarmingsbak blijft kleven, moet dit grondig worden gereinigd;
3. Om kruisbesmetting te voorkomen, mag het gebruikte verwarmingselement en de verwarmingsbak niet opnieuw worden gebruikt voordat ze zijn gedesinfecteerd.
4. Het verwarmingselement en de verwarmingsbak mogen niet worden gebruikt als antiaanbak-mengplaat

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

1. Het is ten strengste verboden dit product voor andere doeleinden te gebruiken:
2. Het verwarmingselement en de bak worden na het verwarmen zeer heet. Vermijd direct contact met ledematen om brandwonden door hoge temperaturen te voorkomen:
3. Mocht u vragen hebben, neem dan tijdig contact op met de klantenservice. Het is verboden om het apparaat zelf te demonteren of te repareren:
4. Na gebruik moeten de behuizing en de lade zijn afgekoeld voordat u ze reinigt, desinfecteert en opbergt. Tijdens het reinigen en desinfecteren moet het apparaat zijn uitgeschakeld om letsel door elektrische schokken te voorkomen.
5. Neem bij vragen tijdig contact op met de klantenservice. Het is verboden om het apparaat zelf te demonteren of te repareren:
6. Sla niet met scherpe voorwerpen op het display en oefen geen druk uit op het display, om schade aan het display te voorkomen