

Wi-Fi -intraorale camera

CF-682

Gebruiks- en installatiehandleiding



Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Productoverzicht	3
1.2. Standaardconfiguratie	3
1.3. Kenmerken	3
2. Werking	4
2.1 Intraorale camera	4
2.2 Bediening van het Wi-Fi-apparaat	4
3. Installatie en bediening	4
3.1 iOS-systeem	4
3.2 Android-systeem	6
3.3 Microsoft-computer	9
4. Problemen oplossen	11
5. Opmerking	12

1. Inleiding

1.1. Productintroductie

Onze camera is de nieuwste draagbare intra-orale camera uit ons assortiment. Dankzij het lichtgewicht ontwerp en de vloeiende contouren ligt hij comfortabel in de hand en is hij eenvoudig te gebruiken. Met de geïntegreerde opnameknop van de camera kunt u in één eenvoudige stap video-opnames maken. En de ingebouwde LED-lichtbron zorgt voor betrouwbare verlichting met een lange levensduur.

1.2. Standaardconfiguratie

1. Camera	1 stuk
2. USB-kabel	1 stuk
3. Schijf	1 stuk
4. Camerahoesjes	50 stuks


1.3. Kenmerken

1. Intraorale camera met een hoge resolutie van 3,0 megapixels
2. Met hoge resolutie, hoge prestaties en autofocus.
3. Ingebouwde 6 stuks witte LED's met hoge helderheid en lange levensduur
4. Dankzij de ingebouwde Wi-Fi-functie kunnen de beelden van de camera tegelijkertijd worden verzonden naar een mobiele telefoon, tablet-pc en pc met Windows-systeem.
5. De twee bedieningsknoppen aan de voorkant: stilzetten/opslaan, aan/uit
6. Ingebouwde lithiumbatterij, gaat na volledige oplaadbeurt meer dan 3 uur mee.
7. Gratis app inbegrepen.

2. Bediening

2.1 Intraorale camera

Voorkant

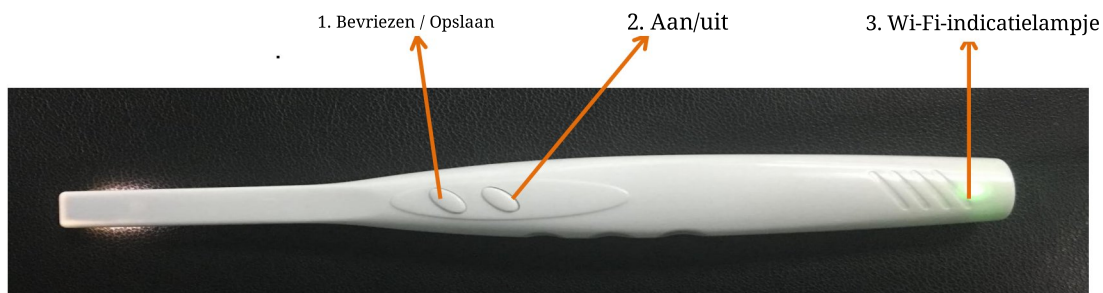

Opmerking: Voordat u het apparaat gebruikt, moet de batterij volledig zijn opgeladen. WIFI-wachtwoord: 88888888

1. Druk op optie 1 (**Bevriezen/Opslaan**): het beeld wordt op het scherm bevroren. Druk er vervolgens nogmaals op om de beelden in de software op te slaan.

2. Druk op optie 2 (**In-/uitschakelen**): om het apparaat in te schakelen, houd de knop lang ingedrukt; om het uit te schakelen, laat u de knop los
3. Het wifi-indicatielampje gaat binnen 2 seconden groen branden; het LED-lampje van de camera gaat na 8 seconden branden.

2.2. Bediening van het wifi-apparaat

1. Installeer de app „MLG“ op uw mobiele telefoon, tablet en computer.
(we bieden drie gratis softwareprogramma's aan)

① (voor Android-systemen)



② (voor Microsoft-computers)



③ (voor iPhone)



Opmerking: ③ (voor iPhone of iPad): ga rechtstreeks naar de App Store, zoek naar "MLG", download de app en installeer deze

2. Na de installatie verschijnt op de mobiele telefoon een logo met de tekst




- Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.**
2. Open de app en controleer of het apparaat goed is verbonden met wifi.

3. De installatie-instructies

3.1. iOS-systeem

1. Druk lang op de „aan/uit“-knop; het stroomlampje wordt binnen 2 seconden groen en de camera-LED gaat na 8 seconden branden. (Opmerking: het IP-adres is al ingesteld voordat het apparaat de fabriek verlaat; elk apparaat heeft een eigen IP-adres)

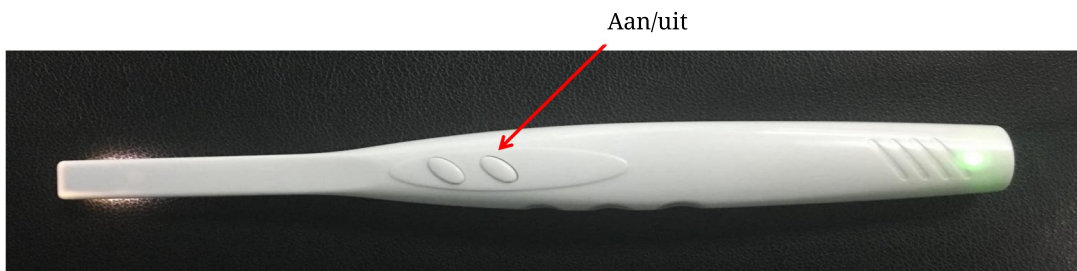

2. Klik op 'Instellingen' op je mobiele telefoon, stel de Wi-Fi in en voer het Wi-Fi-IP-adres en het wachtwoord '88888888' in. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het volgende:




3. Ga terug naar het mobiele telefoonmenu en klik op

Pop-upvenster:



4. Klik op Instellingen zoals hieronder weergegeven:

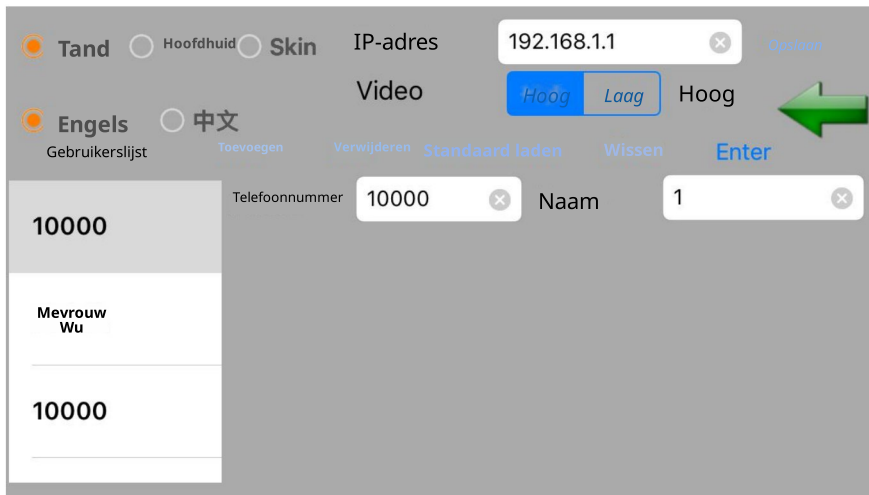

Volg de onderstaande instellingen:

Inhoud: tand

Taal: Chinees en Engels


Video: Hoog

Het IP-adres blijft altijd: 192.168.1.1

5. Klik na het instellen op 'Opslaan' en vervolgens op




Klik vervolgens op 'Enter' in het pop-upvenster

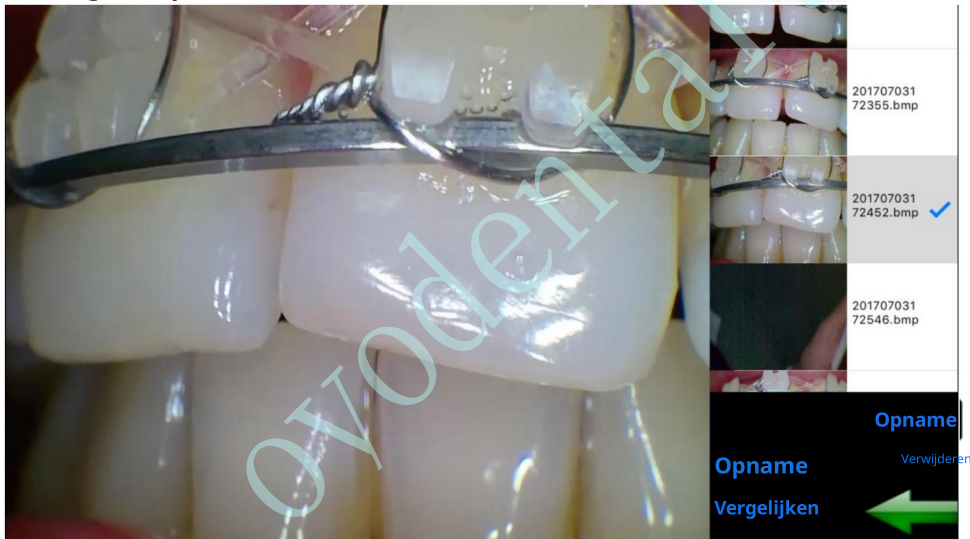


3.2. Android-systeem

1. Druk lang op de "aan/uit"-knop; het stroomlampje wordt binnen 2 seconden groen en de camera-LED gaat later branden (Opmerking: het IP-adres is al ingesteld voordat het apparaat de fabriek verlaat; elk apparaat heeft een eigen IP-adres)

Aan/uit

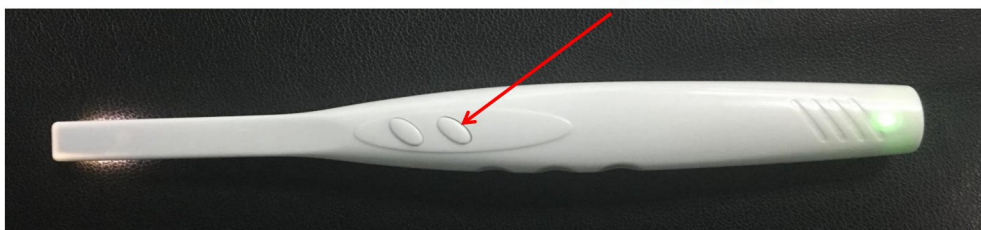

2. Klik op 'Instellingen' op de mobiele telefoon, stel de Wi-Fi in en voer het Wi-Fi-IP-adres en het wachtwoord '88888888' in. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het volgende:

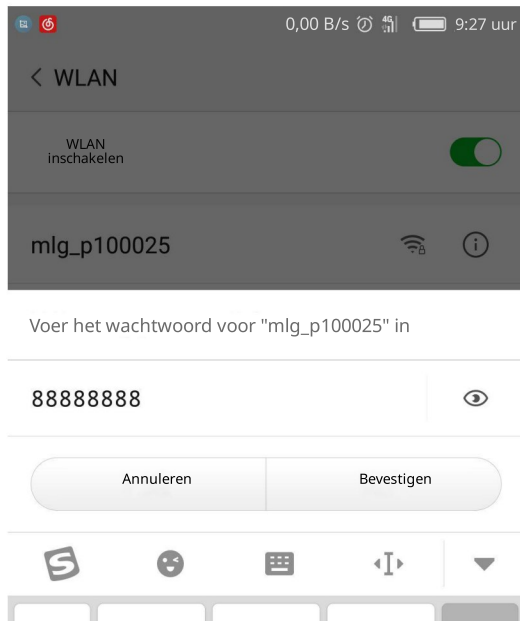

3. Ga terug naar het menu van de mobiele telefoon en klik op

Pop-upvenster, kies "tooth"



4. Klik op 'registreren' om de gegevens in te stellen:

17,7 B/s 9:29 uur

135.000.000.000

Telefoon: 135.000.000 ()

Naam: mlg

E-mail: mlg@qq.com

WeChat: mlg

☒ Man ☐ Vrouw

Adres: Shenzhen

Datum: 23-09-2016

Opmerking: hoofdhuid


5. Druk op 'instellingen' om de taal te kiezen: Engels of Chinees, en druk vervolgens op 'opslaan' (Opmerking: het IP-adres is altijd 192.168.1.1)

83,8 B/s 9:28 uur

ip: 192.168.1.1

☐ Engels ☒ Chinees

6. Druk op 'Enter' om de software te openen:

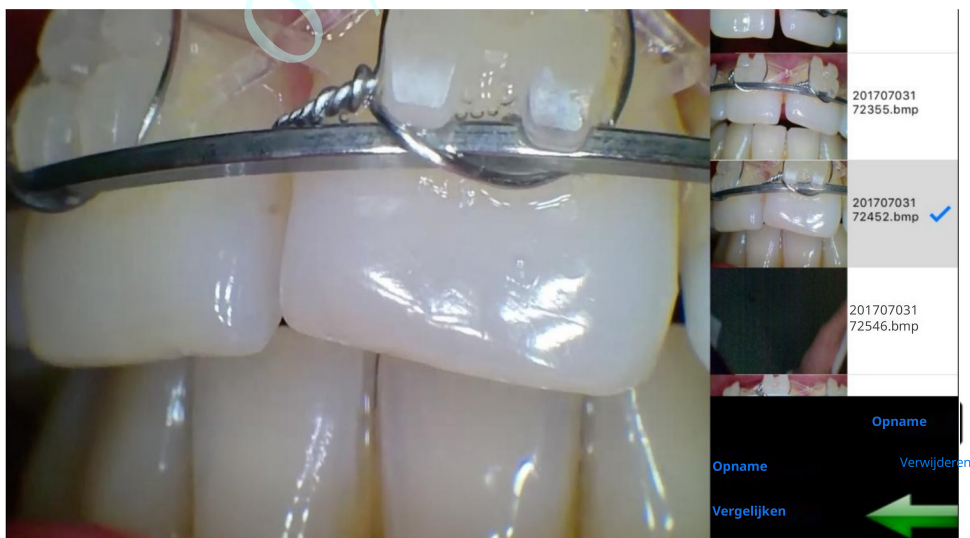

3.3. Microsoft-computer


Opmerking: Je moet de kabelverbinding met de computer verbreken en verbinding maken via wifi.

1. Open eerst de map




2. Er zitten 3 applicaties in de map, zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

(Opmerking: de applicaties werken niet als ze buiten de map worden geopend)

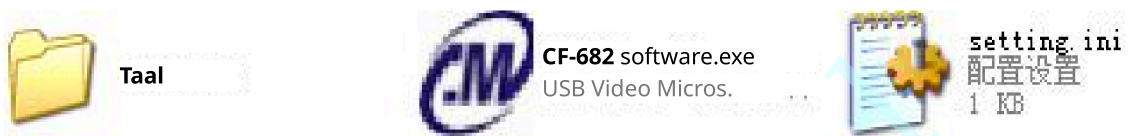


3. Klik op de toepassing; de interface verschijnt als volgt.

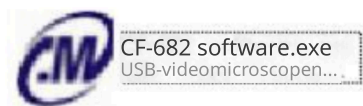


4. U kunt een eenvoudig medisch dossier aanmaken. Klik op "Toevoegen" om fotoalbums toe te voegen en klik op "Enter" om te bevestigen

5. Bewerk de gegevens en druk vervolgens op 'Enter' in de software:

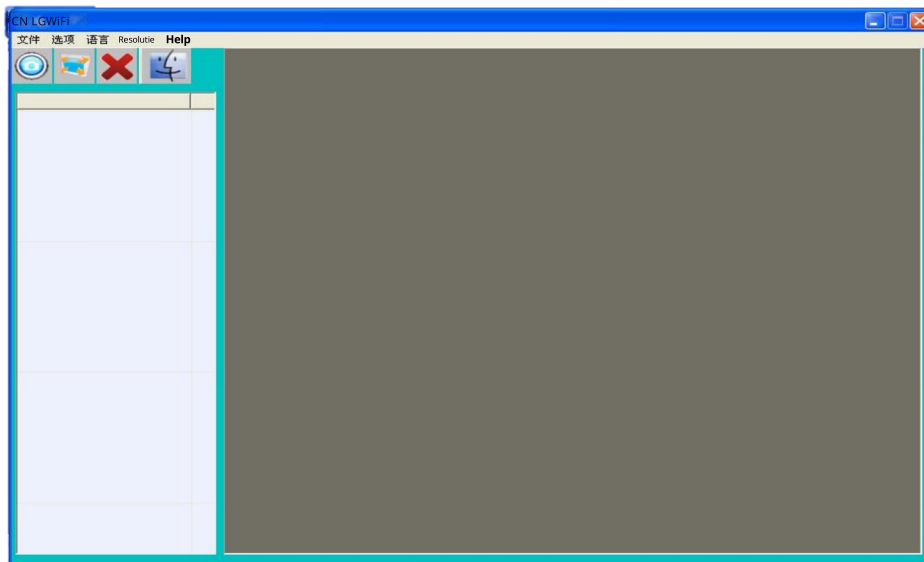

- Cap 1  Opname
- Cap 2  Volledig scherm
- Cap 3  Verwijderen
- Cap 4  Vergelijken

6. Instellingen : Gebruik "USB-videoapparaat", waarna het systeem start :

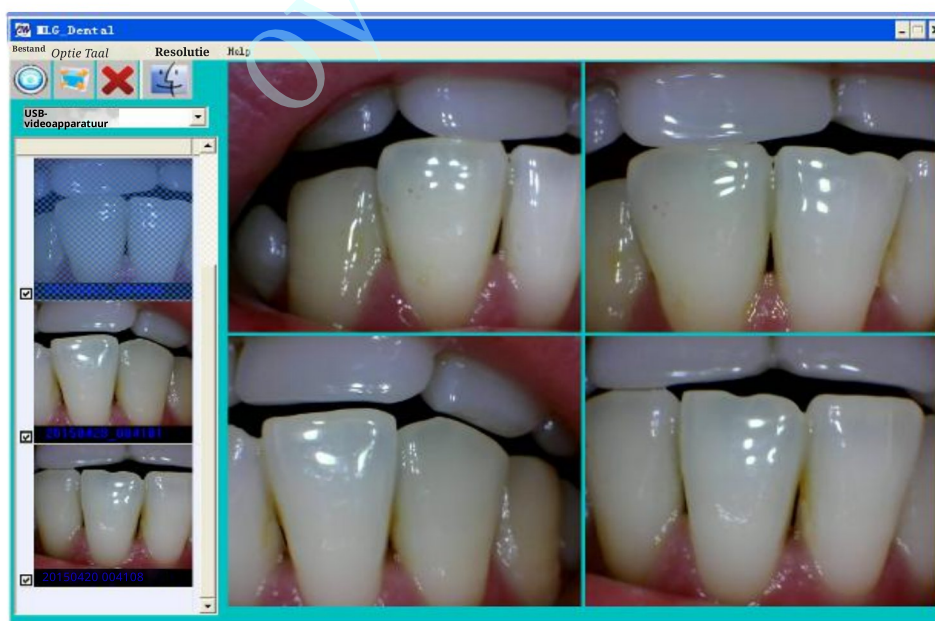

4. Problemen oplossen

Als er problemen zijn met producten, raadpleeg dan eerst de onderstaande speciale gevallen. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met uw lokale dealer.

Item	Probleemtoestanden	Oplossingen
1	de producten kunnen niet worden gestart wanneer de (AAN/UIT)schakelaar wordt geopend	1. Controleer of het apparaat is opgeladen
2	De computer of tv geeft geen beeld weer	1. Controleer of de aansluiting tussen de producten en de computer of tv correct is 2. Controleer of de installatie van de stuurprogramma's is voltooid,
3	tijdens het gebruik kan het beeld enigszins wazig zijn	Als je het voor het eerst gebruikt, is dit een normale reactie. Dit zal later verbeteren
4	Vervolgens treden bevroren beelden op, gevolgd door dithering	de hand trilt bij het maken van foto's met de camera; wanneer gebruikers vaardig zijn in het gebruik van het product, kan dit verschijnsel worden verholpen
5	De beelden op de computer of tv vertonen vlekjes	1. Controleer of er vlekken op het scherm zitten 2. Controleer of er vlekken op de lens zitten 3. Neem contact op met de plaatselijke dealer als de vlek niet kan worden verwijderd

5. Opmerking

Controleer vóór elk gebruik de buitenkant van de producten op tekenen van fysieke schade of defecten. Het oppervlak van de producten moet glad zijn, zonder sporen van afgebroken stukjes of beschadigingen.

KENNIS VAN WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Gebruikers moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van het personeel te waarborgen en moeten bekend zijn met de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in deze handleiding worden vermeld en hieronder zijn samengevat.

LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG U DE AFDEKKING VAN DE BESTURINGSMODULE OF DE VOEDINGSADAPTER NIET VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERDE SERVICEMEDEWERKERS VAN DE DEALER. HET AANSLUITEN VAN EEN APPARAAT OP HET SUPER CAMERA-SYSTEEM DAT NIET VOLDOET AAN DE GELIJKWARDIGE VEILIGHEIDSEISEN VAN HET SYSTEEM, KAN DE VEILIGHEID VAN HET SUPER CAMERA-SYSTEEM VERMINDEREN. SCHAKEL DE STROOM UIT EN HAAL DE STEKKER VAN DE ONDERDELEN VAN HET SUPER CAMERA-SYSTEEM UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U REINIGINGSWERKZAAMHEDEN UITVOERT.

WAARSCHUWING: OM BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. SPUIT GEEN REINIGINGSVLOEISTOFFEN OF DESINFECTIEMIDDELEN RECHTSTREEKS OP HET CAMERAHANDSTUK OF DE BESTURINGSMODULE. ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN DE INTERNE SCHAKELINGEN KUNNEN BINNENDRINGEN. VEEG DE OPPERVLAGKEN NIET AF MET BENZINE, VERDUNNER, ENZ., AANGEZIEN DIT DE AFWERKING KAN AANTASTEN.