
Tandenbleeklamp



Gebruikershandleiding

INHOUD

1. BESCHRIJVING	2
2. KENMERKEN	2
3. INSTALLATIE	3
4. BEDIENING	4
5. TECHNISCHE GEGEVENS	6
6. VOORZORGSMAAATREGELEN	6
7. ONDERHOUD	6
8. TRANSPORT EN OPSLAG	7
9. STORINGEN EN OPLOSSINGEN	8
10. GARANTIEREGISTRATIEFORMULIER	9

1.BESCHRIJVING


Het bleekapparaat D6GG is een nieuw type bleektechnologie, gebaseerd op de combinatie van **krachtig** blauw LED-licht en een versneller uit de bleekset. Door de eigenschappen van de nanometerkorrels op het oppervlak en de afbraak door licht wordt het grootste deel van de H_2O_2 in korte tijd geactiveerd bij lage of normale temperatuur. Er worden grote hoeveelheden zuurstofatomen geproduceerd die de tanden binnendringen en kleurmoleculen afbreken, waardoor het effect van het bleken van de tanden wordt bereikt.

2.KENMERKEN

- (1). De specifieke golflengte en de hoge lichtintensiteit katalyseren de bleekgel.
- (2). 6 krachtige LED-buizen stralen een zeer intensief, koud blauw licht uit
- (3). Het speciale ontwerp met een onschadelijke silicagel-mondstuk voorkomt kruisbesmetting.
- (4). Het nieuwe model van de voeding zorgt voor een stabiele stroomafgifte en langdurig continu gebruik, zelfs in steden en plaatsen met schommelende spanning.
- (5). Het tijdscherm geeft de bleekduur duidelijk weer voor zowel de tandarts als de patiënt.


3.INSTALLATIE

- (1)Main Body
- (2)Standing Bar
- (3)Up/Down Wheel Base
- (4)Mouth Guard
- (5)Wrench
- (6)Power Supply
- (7)Plastic Connector

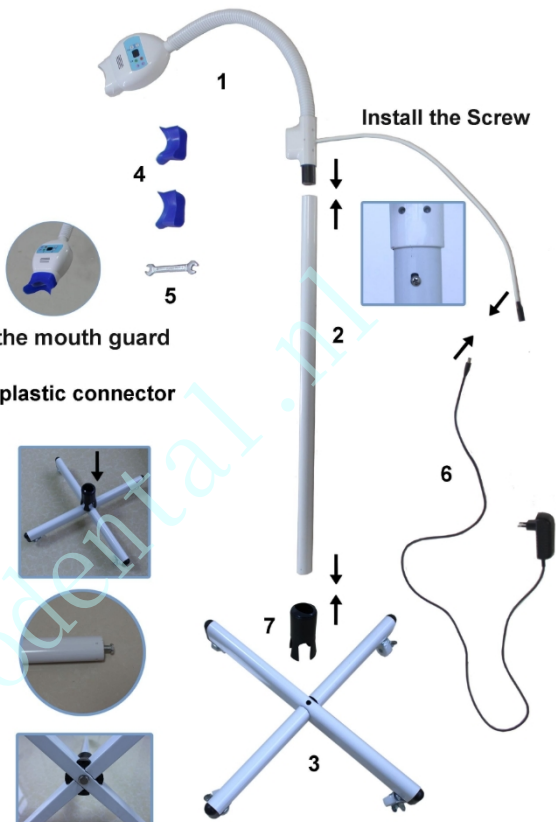

Install the mouth guard

Combine the base with the plastic connector

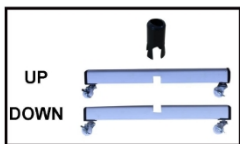

Loosen the screw
in the stand bar

Install the screw
to connect the stand bar,
plastic connector and the base

4.BEDIENING



4.1. Bediening via knoppen

- (1). AAN/UIT: Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen. Het stroomlampje en het stand-by-lampje gaan branden.
- (2). Tijd instellen (UP/DOWN): Afhankelijk van de toestand van de patiënt kan de tandarts de tijd instellen tussen 1 en 20 minuten.
- (3). PAUZE: Druk op deze knop om het apparaat in de h-i-stand-bymodus te zetten. Het 'Ready'-lampje gaat uit en het stand-by-lampje gaat branden.
- (4). START: Druk op deze knop om het apparaat in te stellen op het uitzenden van LED-licht
- (5). HIGH/LOW: Druk op deze knop om de lichtintensiteit in te stellen op de hoge of lage modus

4.2 Gebruik

- (1). Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en schakel het in.
- (2). Het apparaat staat in de stand-by-modus na een kort zoemend geluid. In de stand “AAN/UIT” knippert “20”.
- (3). Stel de bedrijfstijd in met “time up/time down”; het instelbereik loopt van 1 tot 20 minuten.
- (4). Er klinkt een alarmgeluid na het indrukken van “START”, en er schijnt een blauw licht uit de lichtgeleider van de terminal; de tijdweergave telt af.
- (5). Na afloop van de aftelling klinkt er 5 seconden lang een alarmsignaal, waarna het blauwe lampje dooft.

4.3 Gebruiksaanwijzingen

- (1). Schakel het apparaat niet onmiddellijk uit zodra het blauwe lampje uitgaat; het apparaat schakelt volgens de vooraf ingestelde procedure over naar de opwarm- en afkoelmodus
- (2). De lichtgeleider is gemaakt van polyester, een glad en transparant materiaal. Reinig deze niet met scherpe voorwerpen.
- (3). Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en houd het apparaat altijd uit de buurt van warmtebronnen.
- (4). Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt.

5. TECHNISCHE PARAMETERS VAN DE

- (1). Voeding: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- (2). Afmetingen lamp: $33 \times 74 \text{ mm}^2$
- (3). Verlichtingsduur: 0~20 minuten
- (4). Stroominstabiliteit: $< 1\%$
- (5). Werkwijze: tijdsgestuurde output en continu bedrijf
- (6). Koppeling: polyester monowave

6. VOORZORGSMAATREGEL

- (1). De gebruiker dient een veiligheidsbril te dragen tijdens het gebruik van het apparaat.
- (2). Zorg ervoor dat de behandelruimte altijd goed geventileerd is tijdens het gebruik van het apparaat.

7. ONDERHOUD

- (1). Voer regelmatig controles uit en houd het oppervlak van het apparaat schoon.
- (2). Dit apparaat is een nauwkeurig optisch instrument en moet worden gebruikt in een schone en droge ruimte zonder stofdeeltjes.
- (3). Omgevingsvoorwaarden: geen stof, geen schokken, geen vocht.
- (4). Temperatuur in de behandelkamer: $16\text{--}20\text{ }^{\circ}\text{C}$, luchtvochtigheid $< 40\%$
- (5). Reinig de transparante kop na elke behandeling met alcohol (vermijd reiniging met scherpe voorwerpen) en zorg ervoor dat deze schoon is om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen. De silicagel-mondstuk kan worden gesteriliseerd.

- (6). Als er een „foutmelding“ op het display verschijnt, schakel dan de stroom uit en stop onmiddellijk met het gebruik; vraag om hulp of advies van een professionele technicus.
- (7). Ververs regelmatig het water of zand in de basis.

8. TRANSPORT EN OPSLAG

- (1). Leg het apparaat tijdens het transport voorzichtig neer; vermijd hevig schudden.
- (2). Opslagomstandigheden:
 - a. Omgevingstemperatuur: -40~50 °C
 - b. Relatieve luchtvochtigheid: <95%

9.STORINGEN EN OPLOSSINGEN VOOR DE ''

Nr.	STORING	OPLOSSING
1	De machine is ingeschakeld, maar werkt niet	a. Controleer of de stroom goed is aangesloten b. De stroomvoorziening is in slechte staat; neem contact op met de leverancier voor hulp en advies
2	Geen verlichting bij de uitgangspoort zonder spanning	a. De stroomtoevoer is in slechte staat, neem contact op met de leverancier
3	Verminderde lichtopbrengst	a. De doorsnede van de LED-lamp is beschadigd b. De levensduur van de LED-lamp is verstreken, neem contact op met de leverancier om deze te vervangen door een nieuwe
4	Lichtuitgang heeft spanning, maar er is geen licht uitgang	a. De LED-lamp is beschadigd; neem contact op met de leverancier om deze te vervangen door een nieuwe.

10. GARANTIE- REGISTRATIEFORMULIER

Naam van het artikel: _____

Modelnaam: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail: _____

Naam van de distributeur: _____

Geautoriseerde distributeurs: _____

Stempel en handtekening