

Watertank van 1000 ml **PAINLESS SMART CONTROL**

PT 7


Apparaat voor parodontale
behandeling





∞ Elliptische trilling voor comfortabel tandsteen verwijderen en polijsten

De amplitude van de tip ligt tussen
1 μm en 200 μm , wat overeenkomt met een
derde van de diameter van een haar.

Het elliptische trillingspatroon van de tip verdeelt de
impactkracht op de tanden, waardoor tegelijkertijd
comfortabele tandsteenverwijdering en polijsten over
360° mogelijk zijn

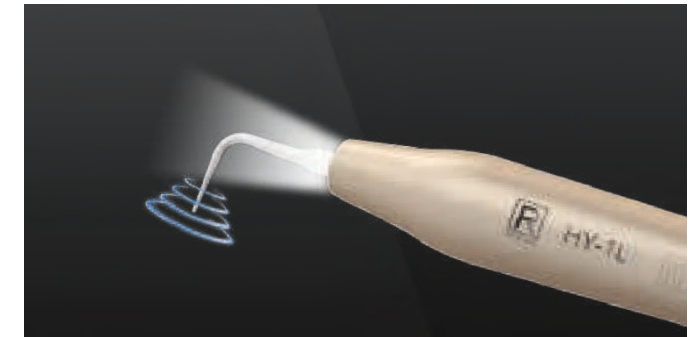

∞ Titanium tip die het cementum minder beschadigt

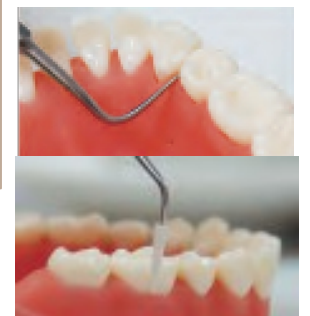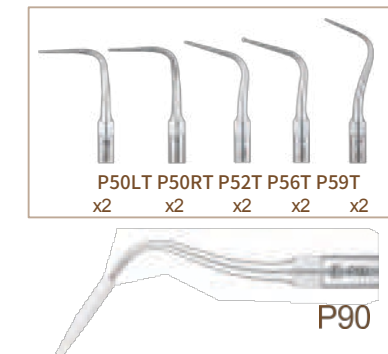

∞ 2 sets autoclaveerbare handstukken.

Afwisselend te gebruiken terwijl de andere in de autoclaaf zit.



∞ Automatische watertoevoer, eenvoudig te verversen

Twee watertoevoermodi: externe en interne watertoevoer.
Corrosiebestendige interne leidingen: geschikt voor waterstofperoxide,
natriumhypochloriet en andere speciale chemicaliën.



∞ Slimme bediening

Bediening via een zeer gevoelig aanraakscherm
Elegant glazen oppervlak, waterdicht en eenvoudig te reinigen.



Voor en na de behandeling



Vóór de behandeling
behandeling

Na de behandeling



Vóór de behandeling

Na de

Belangrijkste specificaties

Frequentie	28000-42000Hz
Hardheid van de tips	30HRC
Trillingsamplitude	1-200µm
Behandelingsdiepte	14mm



CONFIGURATIETIPS

P50LT Titanium gebogen tip (links) voor subgingivale scaling

Plaats de tip loodrecht op de lengteas van de tand. Beweeg de bovenste 2 mm van de tip op en neer.


☆ Zorg ervoor dat het water de bovenste 2 mm van de tip bereikt



P50RT Recht gebogen titanium tip voor subgingivale scaling

Plaats de tip loodrecht op de lengteas van de tand. Beweeg de bovenste 2 mm van de tip op en neer.

☆ Zorg ervoor dat het water de bovenste 2 mm van de tip bereikt

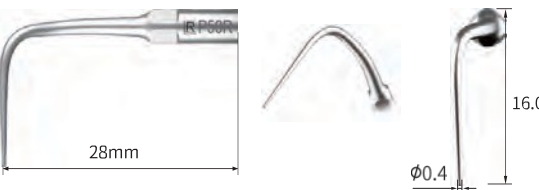

P52T Geschikt voor alle buccale en linguale gebieden

Plaats de tip parallel aan de lengteas van de tand. Beweeg de bovenste 2 mm van de tip heen en weer.

☆ Zorg ervoor dat het water de bovenste 2 mm van de tip bereikt



P56T Geschikt voor het verwijderen van grote tandsteen, beschadigt het tandvlees niet bij het schrappen in de tandvleesrand

Plaats de tip parallel aan de lengteas van de tand. Beweeg de bovenste 2 mm van de tip heen en weer.

☆ Zorg ervoor dat het water de bovenste 2 mm van de tip bereikt



P59T Geschikt voor het gehele buccale en linguale gebied

Breng de tip parallel aan de lengteas van de tand aan. Beweeg de bovenste 2 mm van de tip heen en weer.

☆ Zorg ervoor dat het water de bovenste 2 mm van de tip bereikt

