


Gutta-snijder

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Veiligheidswaarschuwing:

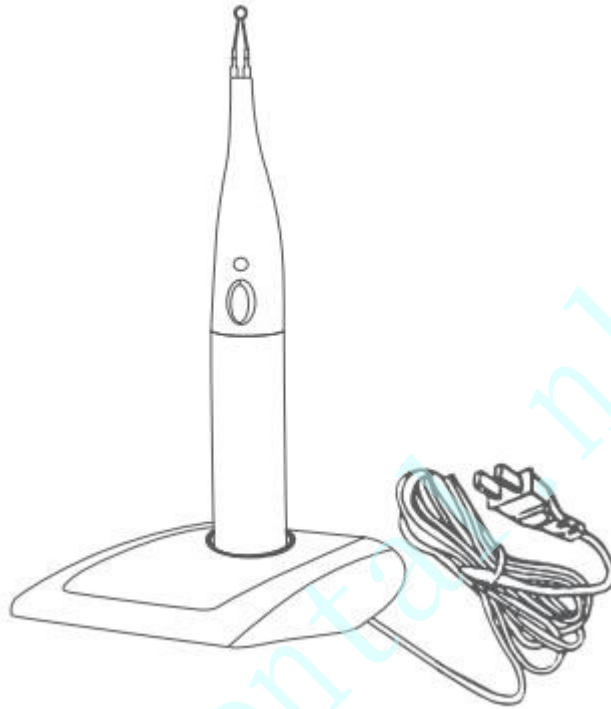

Waarschuwing: lees de handleiding grondig door voordat u dit apparaat gebruikt; deze helpt u bij het correct gebruik ervan.

1. Dit apparaat moet worden gebruikt volgens de richtlijnen in de handleiding; de fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebruik of doel dat buiten de instructies en vereisten valt.
2. Controleer bij het gebruik van de stroombron of de spanning binnen de specificaties van het apparaat valt; anders kan dit schadelijk zijn voor de gebruiker of de patiënt.
3. Om het risico op letsel te vermijden, mag de punt van het apparaat de lippen, het tandvlees of de slijmvliezen van de patiënt niet raken. Het gebruik van een rubberdam is noodzakelijk!
4. Brandgevaar: de punt van de pen mag niet in contact komen met brandbare lucht of vloeistoffen.
5. Dit apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving die gevuld is met brandbare lucht.
6. Dompel het apparaat niet onder in vloeistof en laad het niet op in vloeistof.
7. Als er vloeistof is uitgelekt (waarschijnlijk uit de batterij), stop dan met werken en stuur het apparaat naar het geautoriseerde servicecentrum om de batterij te laten vervangen. Het is gevaarlijk om dit apparaat te gebruiken terwijl de batterij lekt.
8. De batterij mag niet worden vervangen, anders kan dit problemen of storingen veroorzaken.
9. Mensen met hartaandoeningen, zwangere vrouwen en kinderen dienen het apparaat met de nodige voorzichtigheid te gebruiken.
10. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor professionals.

Standaardconfiguratie:

Handvat voor gutta-percha-snijder	1
Opladstation	1
Penpunten (4 stuks)	1

Beoogd gebruik:

Dit product is uitsluitend bestemd voor goed opgeleide tandartsen en tandtechnische laboratoria en is bedoeld voor het vullen van wortelkanalen, om overtollige gutta-percha uit het wortelkanaal te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing:

Controleer vóór het opladen of de spanning van de stroombron overeenkomt met die van het apparaat.

Opladen:

1. Sluit eerst de oplader aan op de stroombron
2. Plaats het apparaat in het opladstation; zodra het apparaat zich in de oplaadhouder bevindt, gaat het indicatielampje op het handvat branden.

Beschrijving van de accu:

1. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het voor het eerst gebruikt; dit duurt ongeveer 12 uur.
2. Laad de nikkel-metaalhydride-accu op voordat deze volledig leeg is. Dit zorgt voor de beste levensduur van uw apparaat. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie bedraagt de levensduur van het product ongeveer 2 jaar.

Gebruik tijdens het werk:

1. De penpunt op het apparaat: het gebogen deel aan de bovenkant bevindt zich tegenover de knop, wat het werk vergemakkelijkt.
2. De penpunten moeten in afgekoelde toestand op het handvat worden geplaatst (en de knop mag tijdens het plaatsen niet worden ingedrukt); gebruik het gebogen deel van de punt om de gutta-percha door te snijden.
3. Zorg ervoor dat de penpunt goed is bevestigd voordat u het apparaat in gebruik neemt. Reiniging: De punt is eenvoudig te reinigen na enkele seconden verwarmen.
4. Wanneer de gutta-percha is doorgesneden, laat u de knop los en wacht u tot de punt is afgekoeld voordat u deze uit de patiënt verwijdert. De bedieningsknop is een „contactknop“: het apparaat stopt met werken zodra de knop wordt losgelaten.

Veiligheidsmaatregelen:

1. Buig de penpunt niet wanneer deze nog op het apparaat zit.
2. Als er tijdens de behandeling te veel kracht wordt uitgeoefend, kan dit de levensduur van de penpunt verkorten.
3. Elektromagnetische straling moet worden vermeden.
4. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het apparaat aan.

Regelmatig onderhoud en reiniging:

1. Als de penpunt niet goed werkt, druk dan onmiddellijk op de knop en controleer de bovenkant van de punt. Als er een defect is, vervang de punt dan door een nieuwe
2. Als het LED-lampje niet brandt tijdens het opladen, controleer dan of het opladstation goed is aangesloten op de stroombron en op de batterij zelf.
3. Reinig en steriliseer de penpunt vóór elke behandeling.
4. De achtergebleven gutta-percha kan worden verwijderd met een medisch wattenstaafje.
5. Bij correct gebruik kan de penpunt meer dan 25 keer in de autoclaaf worden gesteriliseerd; de sterilisatietijd is afhankelijk van de temperatuur (minstens 20

min bij 121 °C, minimaal 5 min bij 132 °C/134 °C)

Uitleg over de garantie:

Als fabrikant nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor defecte producten die het gevolg zijn van het materiaal of het productieproces, mits deze nog binnen de garantieperiode van 1 jaar vallen. De garantie op het hoofddapparaat van deze uitrusting bedraagt 1 jaar, die op de batterij 6 maanden. Voor schade veroorzaakt door onbevoegde derden nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid!

Technische dienst:

1. Afmetingen van het handvat: lengte 126 mm, diameter 19 mm
2. Voedingsspanning: 230 V/50 Hz of 115 V/60 Hz
3. Bedrijfstemperatuur:
0 °C ~ +40 °C
Opslagtemperatuur: -10 °C ~ +60 °C
4. Luchtvochtigheid
tijdens gebruik: < 95%
RV Opslag: < 95% RV
5. Luchtdruk tijdens
gebruik: 70-106 kPa;
opslag: 50-106 kPa
6. Bescherming tegen elektrische schokken: type B

Symbolen en definitie:

	Apparatuur van klasse II (adapter)
	Gelijkstroom
	Apparatuur van type B
	Let op! Lees de gebruiksaanwijzing
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Product met CE-markering
	WEEE
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing