AIXIN MEDICAL GEBRUIKERSHANDLEIDING

AX-J1

Tandheelkundige snij- en polijstmachine

oyodental.nl




Beschrijving:

De AX-J1 tandheelkundige slijp- en snijmachine wordt gebruikt voor het snijden van primaire en secundaire groeven in gietstukken en kan ook worden gebruikt voor het mechanisch polijsten van gietstukken. De voordelen zijn: laag geluidsniveau, hoge rotatiesnelheid, lange snijarm en eenvoudige bediening. De machine is voorzien van een beveiligingsinrichting die de veiligheid van de gebruikers waarborgt. Deze machine heeft de keuringen van het China Certification Center of Machinery Safety (CCMS) doorstaan.

Specificaties:

Voedingsspanning	AC 220 V / 110 V 50 Hz / 60 Hz ±10%
Vermogen	250 W
Rotatiesnelheid	3000 tpm
Afmetingen	50 × 20 × 25 cm^3

Schema:

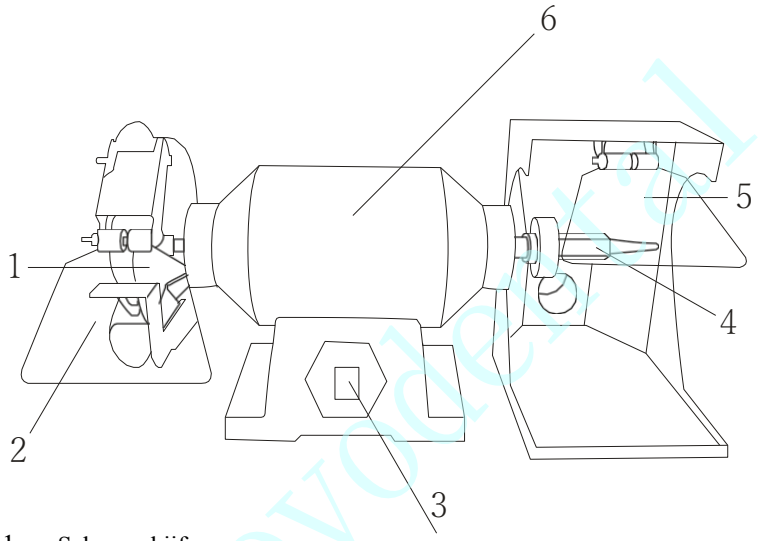

1. Schuurschijf
2. Beschermglas
3. Aan/uit-schakelaar
4. Polijstschijf
5. Beschermglas
6. Motor

oyodental.nl

Gebruiksaanwijzing:

1. Open de verpakking en controleer of alle accessoires aanwezig zijn. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Controleer of er onderdelen los zitten; draai deze indien nodig vast of zet ze vast. Controleer de schuurschijf zorgvuldig op scheuren; gebruikers kunnen dit doen door er zachtjes op te tikken met een houten hamer; een helder geluid geeft aan dat de schijf in orde is.
3. Draai vóór gebruik de schuurschijf en de polijstschijf met de hand rond; er mag geen wrijving zijn. Als er wrijving is, controleer dan wat het probleem is en los dit op voordat u het apparaat gebruikt.
4. De machine is uitgerust met twee beschermende acrylglazen; deze worden op de beschermkap gemonteerd na bevestiging aan de verstelbare beschermplaat. De hoek kan worden aangepast om gebruikers tegen stof te beschermen.
5. Er zit geen bevestigingsgat in de voet; zet deze indien nodig vast met schroeven.
6. De machine is klaar voor gebruik zodra de stroomschakelaar is ingeschakeld.

Waarschuwingen:

1. Draag de beschermglazen wanneer u modellen met slijpschijven snijdt; plaats het stofscherm wanneer u met de polijstschijven polijst.
2. Na 30 minuten ononderbroken gebruik moet de machine worden uitgeschakeld om af te koelen, anders kan de motor beschadigd raken.
3. Tijdens het zagen moet de gebruiker links van de slijpschijf staan en het lichaam uit de buurt van de omtrek van de slijpschijf houden.
4. Houd tijdens het zagen de gipsafgietsel met beide handen vast en zaag deze in een langzame en vloeiende beweging.
5. Controleer of de schuurschijf lekken vertoont; gebruik geen schijven met lekken.
6. Bij het plaatsen van een nieuwe schijf dient u het zachte papier op de juiste manier tussen de schijf en de slijpschijf/polijstschijf te leggen; zorg ervoor dat de klemschijf in balans is en niet zichtbaar schudt of trilt. Draai de moer van de slijpschijf vast, maar draai deze niet te strak aan om te voorkomen dat de schijf breekt. Stel de moer zo af dat de schijf niet los zit. Sluit na het vervangen van de schijf het deksel goed en draai de schroeven aan de rand van de behuizing vast.

Accessoires:

Handleiding	1
Netsnoer	1

oyodental.nl