

Toepassingsgebied

De operatielampen die in de tandartspraktijk worden gebruikt en bedoeld zijn voor het verlichten van de mondholte van patiënten.

Opbouw van de lamp

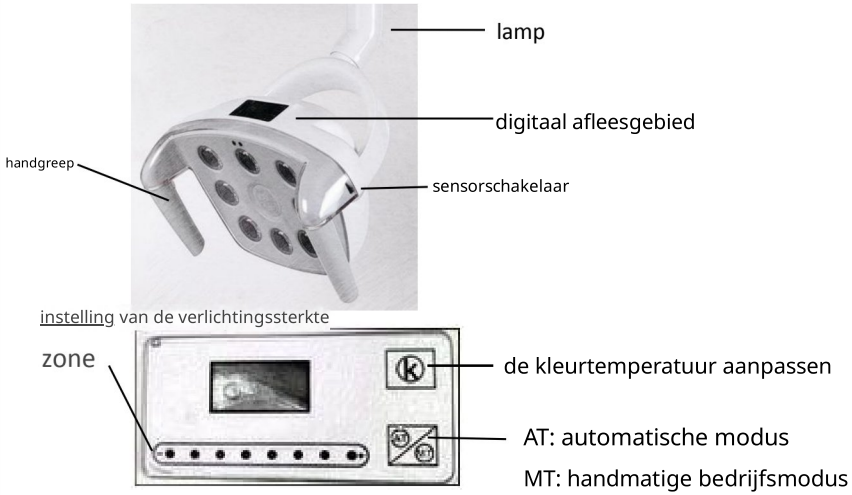

Installatie

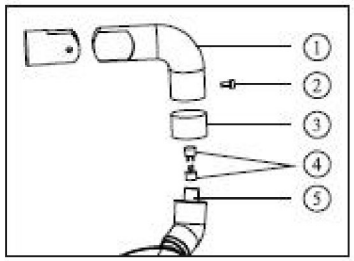

①lamparm ②schroef ③sierkap ④connector ⑤verbindingsas
Installatie:

Sluit de lamparm, de sierkap en de connector aan volgens de afbeelding in de handleiding.

Zorg ervoor dat de voedingsbron 12V-24V wisselstroom is.

Werkomstandigheden

Gebruiksomstandigheden		Transport- en opslagomstandigheden	
Temperatuur	5–40 °C	Temperatuur	-40–70 °C
Relatieve vochtigheid	30–75 %	Relatieve vochtigheid	-10 tot +100%
Atmosferische druk	70–106 kPa	Atmosferische druk	50–106 kPa

Technische specificaties

Ingangsspanning	AC 12 V - 24 V
Vermogen	3–15 W (nominaal 24 W)
Verlichtingssterkte	7.000 lux - 60.000 lux
Kleurtemperatuur	4000 K – 5500 K
Nettogewicht	1850 g
Bruto gewicht	2560 g

Gebruiksaanwijzing



1. Wanneer u op AT of MT drukt, kunt u de bedrijfsmodus wijzigen van de automatische modus naar de handmatige modus.

2. Wanneer de lamp in de AT-modus staat,

lamp via de sensorschakelaar bedienen. Beweeg je hand binnen een bereik van 10 cm langs de sensorschakelaar om de lamp aan of uit te zetten. Als de lamp brandt, houd je je hand binnen 10 cm voor de sensor om de lichtsterkte aan te passen. Druk op de K-knop om te schakelen tussen lage en hoge kleurtemperaturen.

oyodental.nl

3. Wanneer de lamp brandt in de AT- of MT-modus, kunt u op de K-knop drukken om de kleurtemperatuur te wijzigen.

4. Ongeacht of de lamp in de AT- of MT-modus staat, kunt u, wanneer de lamp brandt, de verlichtingssterkte aanpassen door over het verlichtingsregelgebied in het digitale display te schuiven.

5. De lamp beschikt over een geheugenfunctie die de laatst ingestelde verlichtingssterkte onthoudt. 5.
De lamp beschikt over een geheugenfunctie die de laatst ingestelde verlichtingssterkte onthoudt.

6. Drie assen: pas de hoek van de handgreep aan om de lamp in elke gewenste positie te plaatsen. Biedt onbeperkte positioneringsmogelijkheden.

7. De handgreepafdekkingen van de lampen kunnen bij hoge temperatuur worden gedesinfecteerd.

Onderhoud en aandachtspunten

Reinig met de 3-functiespuit of met zacht katoen en een vochtig doekje.

De handgreep kan worden verwijderd en bij hoge temperatuur worden gedesinfecteerd.

Let op:

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of ruwe doeken om de lamp schoon te maken of af te wrijven.

Handleiding voor LED-operatielamp voor tandheelkunde



Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de lamp gebruikt.

oyodental.nl