

ovodental.nl

# i-Prophy

gebruikershandleiding







oyodental.nl

## Inhoud


1. Symbolen.. ..... 2
2. Technische gegevens. ..... 3
..... 4
3. Onderdelenidentificatie. ..... 5
4. Beoogd gebruik. ..... 5
5. Contra-indicaties. ..... 6
6. Gebruikersinterface. ..... 7
7. Opladen. ..... 8
8. Accessoires installeren. ..... 9
9. Bediening. ..... 10
10. Onderhoud en sterilisatie. ..... 14
11. Problemen oplossen. ..... 15
12. EMC-tabel. ..... 19
13. Garantie... ..... 19
14. Levensduur. ..... 19
15. Verklaring. ..... 19
16. Milieubescherming. ..... 19
17.Recht... ..... 19
18.Garantiekaart. ..... 21


oyodental.nl

## 1. Symbolen

| | |
|---|---|
| ⚠ Waar-schu-wing | Als de instructies niet correct worden opgevolgd, kan het gebruik leiden tot gevaren voor het pro-duct of de gebruiker/patiënt. |
| ⚠ OPMER-KING | Aanvullende informatie, uitleg over de werking en prestaties. |
| | Niet weggooien bij het gewone huisvuil (WEEE). |
| SN | Serienummer |
| REF | Catalogusnummer |
| | fabrikant |
| | Datum van de fabrikant |
| | Toepassingsonderdeel type B |
| | Gelijkstroom |
| | Apparaat van veiligheidsklasse II |
| | Op een droge plaats bewaren |
| 135 °C | Kan worden geautoclaveerd tot een maximale temperatuur van 135° Celsius |
| -20 °C<br>55 °C | Temperatuurbeperking |
| 20% 80% | Relatieve vochtigheid |
| 70 kPa<br>106 kPa | Drukcondities tijdens transport en opslag: 70 kPa - 106 kPa |


oyodental.nl

## 2. Technische gegevens

| Model | **i-Prophy** |
|---|---|
| Afmetingen verpakking | 193 mm x 96 mm x 80 mm |
| Gewicht verpakking | Ongeveer 500 g, ±10% |
| Voeding | DC 3,7 V • 1900 mAh |
| Voeding oplader | 5 VA |
| Beschermingsgraad | IPX 0 |
| Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II |
| Toegedeeld deel | B |
| Koppelbereik | > 1,5 N·cm |
| Toerentalbereik | 500 tpm – 2500 tpm |
| Bedrijf | Voorwaarts (rotatie met de klok mee) |
| Bedrijfsomstandigheden | Gebruik: in gesloten ruimtes<br>Omgevingstemperatuur: 5 °C ~ 40 °C<br>Relatieve vochtigheid: <80%<br>Werkhoogte < 2000 m boven zeeniveau<br>Atmosferische druk: 70 kPa ~ 106 kPa |
| Transport- en opslagomstandigheden | Omgevingstemperatuur: -20 °C ~ +55 °C<br>Relatieve vochtigheid: 20% ~ 80 %<br>Luchtdruk: 70 kPa ~ 106 kPa |

oyodental.nl

## 3. Onderdelenidentificatie

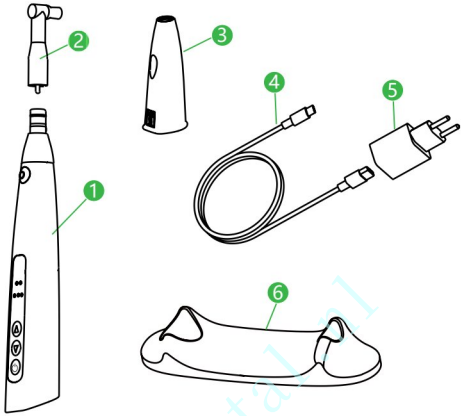


Onderdelen en accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** Hoofdunit | 1 (stuks) | **2** Prophy-hoekstuk | 2 (stuks) |
| **3** Beschermhoes | 2 (stuks) | **4** USB-kabel | 1 (stuks) |
| **5** Adapter | 1 (stuks) | **6** Voet | 1 (stuks) |
| Gebruikershandleiding | 1 (stuks) | | |

oyodental.nl

## 4. Beoogd gebruik

**i-Prophy** is een draadloos profylaxehandstuk dat kan worden gebruikt voor het reinigen en polijsten van tanden.
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder begeleiding van gekwalificeerd medisch personeel. Het personeel dat het apparaat gebruikt, moet hiervoor zijn opgeleid.


## 5. Contra-indicaties

Dit apparaat is gecontra-indiceerd bij patiënten/gebruikers met medische implantaten, zoals pacemakers of cochleaire implantaten enz.
Gebruik het apparaat niet voor implantaten of andere niet-endodontische tandheelkundige ingrepen.
De veiligheid en werkzaamheid bij zwangere vrouwen en kinderen zijn niet vastgesteld.

oyodental.nl

## ⚠ Waarschuwing

Lees de volgende waarschuwingen vóór gebruik:
1. Het apparaat mag niet in een vochtige omgeving worden geplaatst of op een plek waar het in contact kan komen met vloeistoffen van welke aard dan ook.
2. Stel het apparaat niet bloot aan directe of indirecte warmtebronnen. Het apparaat moet in een veilige omgeving worden gebruikt en bewaard.
3. Het apparaat vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en moet worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de EMC-informatie. Gebruik het apparaat met name niet in de nabijheid van tl-lampen, radiozenders, afstandsbedieningen, draagbare of mobiele RF-communicatieapparaten, en laad het niet op, gebruik het niet en bewaar het niet bij hoge temperaturen. Houd u aan de gespecificeerde gebruiks- en opslagvoorwaarden.
5. Het dragen van handschoenen is verplicht tijdens de behandeling.
6. Mocht het apparaat tijdens de behandeling storingen vertonen, schakel het dan uit. Neem contact op met de leverancier.
7. Open of repareer het apparaat niet zelf; anders vervalt de garantie.

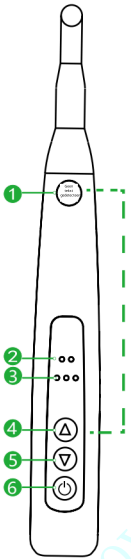


**Schakel het apparaat in**
Houd **6** langer dan 0,8 seconden ingedrukt.

**Snelheid wijzigen**
Druk op ◄ en ► om de snelheid te wijzigen

**Start en stop**
Druk op **1** om de motor te starten en te stoppen.

**Apparaat uitschakelen**
Houd **6** lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

1 Start/Stop-knop
2 Batterij-indicator
3 Snelheidsindicator
4 Verlaagknop
5 Verhogingsknop
6 Hoofdschakelaar

**OPMERKING**


1. Het apparaat schakelt automatisch uit als er 8 minuten lang geen bediening plaatsvindt.

oyodental.nl


https://www.oyodental.nl/

## 7. Opladen

Schakel het apparaat in door op knop **1** te drukken.

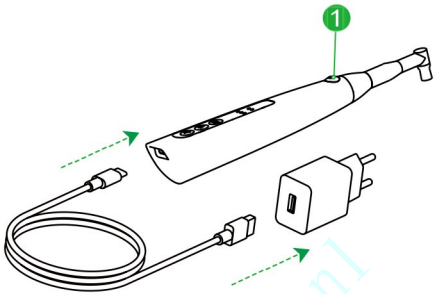


Sluit de USB-kabel aan op de voedingsaansluiting van het apparaat en steek het andere uiteinde in een USB-adapter

Tijdens het opladen brandt het batterij-LED-lampje oranje; het wordt pas groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Het duurt ongeveer 4 uur om de batterij volledig op te laden, afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit en de toestand van de batterij.

**Waarschuwing**


1. Laad het apparaat langer dan 4 uur op voordat u het product voor het eerst gebruikt.
2. Gebruik uitsluitend de originele adapter en accu.
3. Voer afgedankte batterijen af volgens de plaatselijke voorschriften.
4. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
5. Vervang de batterij niet; alleen een opgeleide technicus of distributeur mag de batterij vervangen. De elektronische onderdelen raken beschadigd als u een verkeerde batterij gebruikt of deze op een verkeerde manier installeert.
6. Laad de batterij onmiddellijk op als het batterijniveau laag is.

oyodental.nl

## 8. Accessoires installeren


### 8.1 beschermhoes

Het wordt aanbevolen om tijdens de behandeling een beschermhoes te gebruiken.

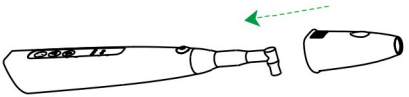


### 8.2 Prophy-hoekstuk bevestigen

Steek de Prophy-hoek in het handstuk totdat deze stevig op zijn plaats zit.

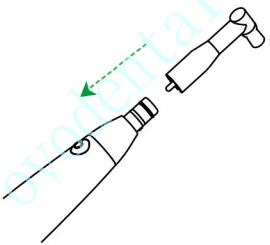


De prophy-hoek kan 360° worden gedraaid zonder te worden losgekoppeld, waardoor deze tijdens de behandeling gemakkelijk te gebruiken is.

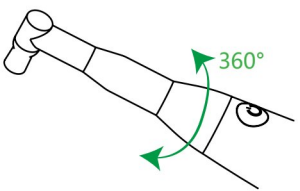



oyodental.nl

## 9. Bediening


Druk op de hoofdschakelaar om het apparaat in te schakelen.

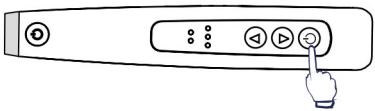


Druk op de Start&Stop-knop om de motor te starten en te stoppen.

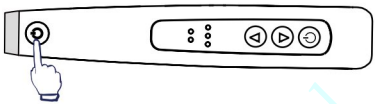


Druk op de toetsen ◄ en ► om de snelheidsinstelling te wijzigen.

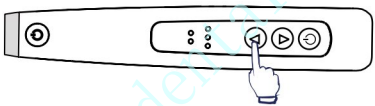

Snelheidsinstellingen: 500 tpm, 1500 tpm, 2500 tpm

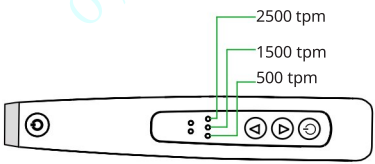


Druk op de hoofdschakelaar om het apparaat uit te schakelen.

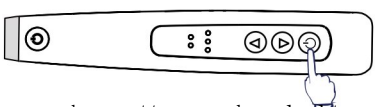

https://www.oyodental.nl/

## 10. Onderhoud en sterilisatie

### 10.1 Inleiding

Om hygiënische en sanitaire redenen moeten de onderdelen vóór elk gebruik worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd om besmetting te voorkomen. Dit geldt zowel voor het eerste gebruik als voor het daaropvolgende gebruik.
Houd u aan de nationale richtlijnen, normen en vereisten voor reiniging, desinfectie en sterilisatie.

### 10.2 Algemene aanbevelingen

1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de steriliteit van het product bij de eerste cyclus en bij elk volgend gebruik, evenals voor het gebruik van beschadigde of vervuilde instrumenten, indien van toepassing na sterilisatie.
2. Draag voor uw eigen veiligheid persoonlijke beschermingsmiddelen
3. Gebruik uitsluitend een desinfectiemiddel waarvan de werkzaamheid is goedgekeurd (VAH/DGHM-lijst, CE-markering en FDA-goedkeuring) en dat voldoet aan de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het desinfectiemiddel.
4. De waterkwaliteit moet voldoen aan de lokale voorschriften, met name voor de laatste spoelstap of bij gebruik van een was- en desinfectiemachine.
5. Reinig en was de onderdelen grondig voordat u ze in de autoclaaf plaatst.
6. Smeer het motorhandstuk niet.
7. Reinig de profylaxehoek niet met een ultrasoon reinigingsapparaat.
8. Gebruik geen bleekmiddel of desinfectiemiddelen op basis van chloor.

### 10.3 Autoclaveerbare onderdelen

beschermhoes



**Waarschuwing**

1. Alleen de hierboven genoemde onderdelen kunnen worden geautoclaveerd.
2. Steriliseer de bovengenoemde onderdelen vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.


https://www.oyodental.nl/

## 10.4 Reiniging en desinfectie

| Stap | Werk-wijze | Verwerking |
|---|---|---|
| 1 | Voorbe-reiding | Koppel de onderdelen los van het motorhandstuk. Bewaar de instrumenten in een vochtige omgeving. |
| 2 | Transport | Zorg voor veilige opslag en transport naar de rei-nigingsruimte om schade en verontreiniging van de omgeving te voorkomen. |
| 3 | Voorbe-reiding op deconta-minatie | Het apparaat moet in gedemonteerde toestand worden herverwerkt. |
| 4 | Voorreini-ging | Voer een handmatige voorreiniging uit totdat de onderdelen visueel schoon zijn. Dompel de on-derdelen onder in een reinigingsoplossing en spoel de lumina gedurende ten minste 10 secon-den door met een waterstraalpistool met koud kraanwater. Reinig de oppervlakken met een zachte bristelborstel. |
| 5 | Reiniging | De voorkeur gaat uit naar geautomatiseerde reinigingsmethoden, met name vanwege de betere standaardiseermogelijkheden en de industriële veiligheid.<br>Geautomatiseerde reiniging:<br>Plaats de onderdelen voorzichtig op een tray in de was- en desinfectiemachine en stel de para-meters als volgt in:<br>1. 4 min. voorwassen met koud water (<40 °C);<br>2. 5 minuten wassen met een mild alkalisch reini-gingsmiddel bij 55 °C.<br>3. 3 minuten neutraliseren met warm water (>40 °C);<br>4. 5 minuten tussenspoelen met warm water (>40 °C) |
| 6 | Desinfec-tie | Geautomatiseerde thermische desinfectie in een was- en desinfectiemachine, rekening houdend met de nationale vereisten met betrekking tot de A0-waarde (zie EN 15883).<br>Een desinfectiecyclus van 5 minuten bij 93 °C is gevalideerd voor het apparaat om een A0-waarde van 3000 te bereiken. |

https://www.oyodental.nl/

| Stap | Werking | Verwerking |
|---|---|---|
| 7 | Drogen | Geautomatiseerd drogen:<br>Het drogen van de buitenkant van het instrument via de droogcyclus van de was- en desinfectiemachine. Indien nodig kan aanvullend handmatig drogen worden uitgevoerd met een pluisvrije doek. Blaas de holtes van de instrumenten leeg met behulp van steriele perslucht. |
| 8 | Verpakking | Verpak elk onderdeel in geschikt verpakkingsmateriaal voor sterilisatie. |
| 9 | Sterilisatie | Stoomsterilisatie bij 135 °C gedurende ten minste 4 minuten, of bij 121 °C gedurende ten minste 35 minuten. Minimale droogtijd na sterilisatie: 10 minuten |
| 10 | Opslag | Bewaar de onderdelen in de sterilisatieverpakking in een droge en schone omgeving. |

oyodental.nl

## ⚠ Waarschuwing



Gebruik uitsluitend ethanol voor desinfectie (70 tot 80% vol. ethanol).

Gebruik uitsluitend goedgekeurde autoclaven volgens EN 13060 of EN 285. De sterilisatieprocedure moet voldoen aan ISO 17665. Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u het aanraakt.

Controleer de verpakking vóór gebruik (integriteit van de verpakking, geen vocht en geldigheidsduur); steriliseer het product anders opnieuw.

Desinfecteer het product vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.

## 10.6 Desinfectie van onderdelen
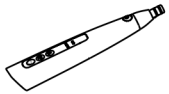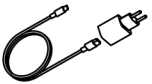
| Handstuk | Basisstation | USB-kabel |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Veeg alle oppervlakken minstens 2 minuten af met een doekje dat licht is bevochtigd met ethanol voor desinfectie (ethanol 70 - 80 vol%), herhaal dit 5 keer.

**OPMERKING**

1. Gebruik uitsluitend ethanol voor desinfectie.

## 10.5 Onderhoud van de batterij

Laad de batterij op wanneer het batterijpictogram op het display knippert.

Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, moet u het minstens één keer per maand volledig opladen om te voorkomen dat de batterij te leeg raakt.

oyodental.nl

## 11. Problemen oplossen

Als er tijdens het gebruik van het product problemen optreden, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met uw distributeur.

| Probleem | Oorzaak | Oplossing | Ref. chap |
|---|---|---|---|
| Het apparaat kan niet worden ingeschakeld | De batterij is te laag | Laad de batterij op | / |
| | De hoofdschakelaar is te kort ingedrukt | Houd de -knop langer dan 0,8 seconden ingedrukt | / |
| Er is geen -geluid | Printplaat defect | Neem contact op met je -distributeur | / |
| | | | / |
| wordt niet weer-gegeven op het | Printplaat defect | Neem contact op met uw -distributeur | / |
| kan niet wor-den opgeladen | is verkeerd aangeslo-ten met de -kabel | Controleer de verbinding | / |

oyodental.nl

## 12. EMC-tabel

| Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies | | |
|---|---|---|
| De **i-Prophy** is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de **i-Prophy** dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. | | |
| **Emissietest** | **Naleving** | **Elektromagnetische e omgeving – richtlijnen** |
| RF-emissies volgens CISPR 11 | Groep 1 | De **i-Prophy** gebruikt RF-energie uitsluitend voor zijn interne werking. Daarom is de RF-emissie ervan zeer laag en is het onwaarschijnlijk dat deze storing veroorzaakt in nabijgelegen elektronische apparatuur. |
| RF-emissies CISPR 11 | Klasse B | De **i-Prophy** is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, inclusief huishoudelijke omgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat gebouwen voor huishoudelijke doeleinden van stroom voorziet. |
| Harmonische -emissies IEC 61000-3-2 | Klasse A | |
| Spannings schommelingen/ -flikkering -emissies IEC 61000-3-3 | Voldoet | |

oyodental.nl

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit

De **i-Prophy** is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de **i-Prophy** dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

| **Immuniteitstest** | **IEC 60601-testniveau** | **Nalevings-niveau** | **Elektromagnetische omgeving – richtlijnen** |
|---|---|---|---|
| Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2 | ± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in de lucht | +/- 8 kV contact +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV in de lucht | Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% bedragen. |
| Elektrische snelle transiënten/bursts IEC 61000-4-4 | ±2 kV, herhalings-frequentie 100 kHz | ±2 kV, herhalings-frequentie 100 kHz | De kwaliteit van de netvoeding moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. |
| Piekstroom IEC 61000-4-5 | Lijn-naar-lijn: ±0,5 kV, ±1 kV Lijn-naar-aarde: ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV | Lijn-naar-lijn: ±0,5 kV, ±1 kV Lijn-naar-aarde: ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV | De kwaliteit van de netvoeding moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. |
| Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2 | +/8 kV contact +/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV, +/-15 kV in de lucht | +/- 8 kV contact +/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV, +/-15 kV in de lucht | Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren met synthetisch materiaal zijn bedekt, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30 % bedragen. |
| Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op voedingslijnen IEC 61000-4-11 | 0 % UT; 0,5 cyclus bij 0°, 45°, 90°, 134°, 180°, 225°, 270° en 315° 0 % UT; 1 cyclus en 70 % UT; 25/30 cycli sinusfase bij 0° 0 % UT; 250/300 cycli | 0% UT; 0,5 cyclus bij 0°, 45°, 90°, 134°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% UT; 1 cyclus en 70% UT; 25/30 cycli sinusfase bij 0° 0% UT; 250/300 cyclus | De kwaliteit van de netvoeding moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. Indien de gebruiker van de apparaten ononderbroken werking vereist tijdens stroomonderbrekingen, wordt aanbevolen de apparaten te voeden via een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) of een batterij |

Gedemonstreerd



https://www.oyodental.nl/

| Immuniteitstest | IEC 60601-testniveau | Conformiteitsniveau | Elektromagnetische omgeving – richtlijnen |
|---|---|---|---|
| Magnetisch veld met netfrequentie IEC 61000-4-8 | 30 A/m 50 Hz of 60 Hz | 30 A/m 50 Hz of 60 Hz | Het magnetische veld met netfrequentie moet op niveaus liggen die kenmerkend zijn voor een typische locatie in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. |

Opmerking: UT: nominale spanning(en); Bijv.
25/30 cycli betekent 25 cycli bij 50 Hz of 30 cycli bij 60 Hz

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit

De **i-Prophy** is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de **i-Prophy** dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

| Immuniteitstest | IEC 60601-testniveau | Nalevingsniveau | Elektromagnetische omgeving – richtlijnen |
|---|---|---|---|
| Geleide storingen veroorzaakt door RF-velden IEC 61000-4-6<br><br>Uitgestraalde RF-EM-velden IEC 61000-4-3<br><br>Nabijheidsvelden van draadloze RF-communicatieapparatuur IEC 61000-4-3 | 3 V 0,15 MHz – 80 MHz, 6 V in ISM-banden tussen 0,15 MHz en 80 MHz, 80 % AM bij 1 kHz<br>3 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz, 80 % AM bij 1 kHz<br>Zie de tabel met apparatuur voor draadloze RF-communicatie in „Aanbevolen minimale afstanden“ | 3 V<br>3 V/m<br>Voldoet | Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij enig onderdeel van de **i-Prophy**, inclusief kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen afstand die is berekend aan de hand van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender.<br>Aanbevolen minimale afstanden.<br>Zie de tabel met RF-apparatuur voor draadloze communicatie in „Aanbevolen minimale afstanden“. |

https://www.oyodental.nl/

## Aanbevolen minimale afstanden

Tegenwoordig worden veel draadloze RF-apparaten gebruikt op diverse locaties in de gezondheidszorg waar medische apparatuur en/of systemen worden ingezet. Wanneer deze apparaten in de directe nabijheid van medische apparatuur en/of systemen worden gebruikt, kan dit de basisveiligheid en de essentiële prestaties van de medische apparatuur en/of systemen beïnvloeden. De **i-Prophy** is getest met het immuniteitstestniveau uit de onderstaande tabel en voldoet aan de desbetreffende eisen van IEC 60601-1-2:2014. De klant en/of gebruiker dient ervoor te zorgen dat er een minimale afstand wordt aangehouden tussen draadloze RF-communicatieapparatuur en de **i-Prophy**, zoals hieronder aanbevolen.

| Testfrequentie (MHz) | Band (MHz) | Dienst | Modulatie | Maximaal vermogen (W) | Afstand (m) | Immuniteits-testniveau (V/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 380–390 | TETRA 400 | Puls modulatie 18 Hz | 1,8 | 0,3 | 27 |
| 450 | 430–470 | GMRS 460 FRS 460 | FM ± 5 kHz -afwijking 1 kHz sinus | 2 | 0,3 | 28 |
| 710<br>745<br>780 | 704–787 | LTE-band 13, 17 | Puls modulatie 217 Hz | 0,2 | 0,3 | 9 |
| 810<br>870<br>930 | 800–960 | GSM-900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-band 5 | Puls modulatie 18 Hz | 2 | 0,3 | 28 |
| 1720<br>1845<br>1970 | 1700–1990 | GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-band 1, 3, 4, 25; UMTS | Puls modulatie 217 Hz | 2 | 0,3 | 28 |
| 2450 | 2400–2570 | Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7 | Puls modulatie 217 Hz | 2 | 0,3 | 28 |
| 5240<br>5500<br>5785 | 5100–5800 | WLAN 802.11-a/n | Puls modulatie 217 Hz | 0,2 | 0,3 | 9 |

**OPMERKING**

1. Het gebruik van andere accessoires en kabels dan die welke door de fabrikant van de **i-Prophy** zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van **de i-Prophy** en tot een onjuiste werking.



https://www.oyodental.nl/

| Kabelinformatie | | | |
|---|---|---|---|
| **Kabel-naam** | **Kabellengte (m)** | **Afgeschermd of niet** | **Opmer-king** |
| Kabel | 1,0 | Nee | / |

## 13. Garantie

1. Op de hoofdeenheid van **de i-Prophy** geldt een **garantieperiode van 12 maanden**, die ingaat op de datum van levering door ons.
2. De hoofdunit en andere onderdelen van de **i-Prophy** worden gerepareerd door erkende reparatiepartners.
3. Indien wordt aangetoond dat de schade is veroorzaakt door onjuist dagelijks onderhoud door de gebruiker, valt deze niet onder de garantie.

## 14. Levensduur

De levensduur van het **i-Prophy-hoofdapparaat** bedraagt **5 jaar**.

## 15. Verklaring

In de volgende gevallen aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid:

1. Gebruik van **de i-Prophy** voor andere doeleinden dan die welke in deze handleiding zijn gespecificeerd.
2. Het reinigen, desinfecteren of steriliseren wordt niet uitgevoerd volgens de in deze handleiding beschreven methode.
3. Gebruik of onderhoud door ongeschoold personeel.
4. Neem bij vragen contact op met uw lokale dealer.

## 16. Milieubescherming

De verpakking moet worden gerecycled. Metalen onderdelen van het apparaat moeten als schroot worden afgevoerd. Kunststoffen, elektrische componenten en printplaten moeten als elektronisch afval worden afgevoerd. De lithiumbatterijen moeten als speciaal afval worden afgevoerd. Ga hiermee om volgens de lokale milieuwetten en -voorschriften.

## 17. Rechten

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Het recht op de definitieve interpretatie berust bij de fabrikant. De fabrikant heeft verschillende octrooien aangevraagd voor het industriële ontwerp, de interne structuur, enzovoort; elke kopie of namaakproduct kan juridische gevolgen hebben.

https://www.oyodental.nl/

| 18. Garantiekaart | | |
|---|---|---|
| Naam van de klant: | Tel.: | Aankoopdatum: |
| Adresgegevens: | | |
| Productnaam: | | Model: |
| Serienummer: | | |
| Onderhoudsrapport | Datum | Oorzaak van de storing |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Hartelijk dank voor het gebruik van onze producten; deze tabel geldt als basis voor het vastleggen van garanties, bewaar deze daarom zorgvuldig; bij verlies wordt er geen reparatie verleend

1. De garantieperiode voor de producten van ons bedrijf bedraagt **1 jaar**, gerekend vanaf de leveringsdatum. Gedurende deze garantieperiode van 1 jaar zorgen wij voor kosteloze reparatie van alle problemen die worden veroorzaakt door de kwaliteit of constructie van de producten, mits deze onder normale omstandigheden zijn gebruikt.
2. Mocht er tijdens de garantieperiode een defect optreden, stuur dan het defecte apparaat samen met de ingevulde garantiekaart naar ons bedrijf voor reparatie.
3. Apparaten die door uzelf zijn aangepast of waaraan u zelf extra functies hebt toegevoegd, worden niet in behandeling genomen voor reparatie.

**Er wordt geen gratis onderhoud verleend in de volgende gevallen:**

1. Zonder garantiekaart of aankoopbewijs.
2. Storingen veroorzaakt door onjuiste installatie, bediening en sterilisatie (niet volgens de gebruikershandleiding).
3. De storing is veroorzaakt door demontage door een onderhoudsmonteur die niet door ons bedrijf is geautoriseerd.
4. Schade veroorzaakt door onjuiste opslag, onderhoud, defecten of gebruik door de klant.
5. Snel verslijtende onderdelen en meegeleverde accessoires vallen hier niet onder.
6. Storingen en schade veroorzaakt door overmacht.

https://www.oyodental.nl/