JT-51B Specificaties van een krachtige tandheelkundige vibrator



ovdental.nl

Dit is een krachtige, zeer efficiënte vibrator; dankzij het unieke ontwerp van de warmteafvoerbasis kan hij langdurig worden gebruikt. Hij beschikt over twee standen: zwak en sterk, die naar behoefte kunnen worden aangepast.


Zet de schakelaar vóór het inschakelen in de middelste stand „O“; schakel vervolgens de stroom in, zet de schakelaar aan (het indicatielampje gaat branden) en kies de sterke of zwakke stand; zet ten slotte schakelaar twee of schakelaar één aan, waarna het apparaat begint te werken.

Storingsverschijnsel: tijdens het gebruik wordt het geluid plotseling luider en gaat dit gepaard met een ongewoon geluid.
Oorzaak: de speling tussen het platform van de vibrator en de transformator is ongebruikelijk.
Probleemoplossing: Schakel de stroom uit, verwijder het rubberen platform en draai de machine om, zodat de basis naar boven wijst. Gebruik een „+“-schroevendraaier om de 4 M6-schroeven te verwijderen, zodat het trillingsplatform loskomt van de behuizing. Controleer de vier trillingssteunpalen één voor één om te zien of ze los zijn geraakt of dat de hoogte niet overal gelijk is. Stel de hoogte van de vier trillingssteunpalen opnieuw in op 74 mm en draai ze stevig vast. (Afstelgereedschap: 10 mm inbussleutel met tegenoverliggende zijkant)

oyodental.nl

JT-51
Krachtige tandheelkundige vibrator

#	Onderdeelnummer	Aantal
1	rubberen plaat	1
2	platform	1
3	transformator	1
4	trilsteunpaal, een assemblage	1
5	twee-in-één-stekker	1
6	bord	1
7	hoofdgedeelte	1
8	rubberen voetsteun	4
9	-potentiometer voor snelheidsregeling	1
10	schakelaar met drie standen	1
11	knop	2
12	schakelaar	4

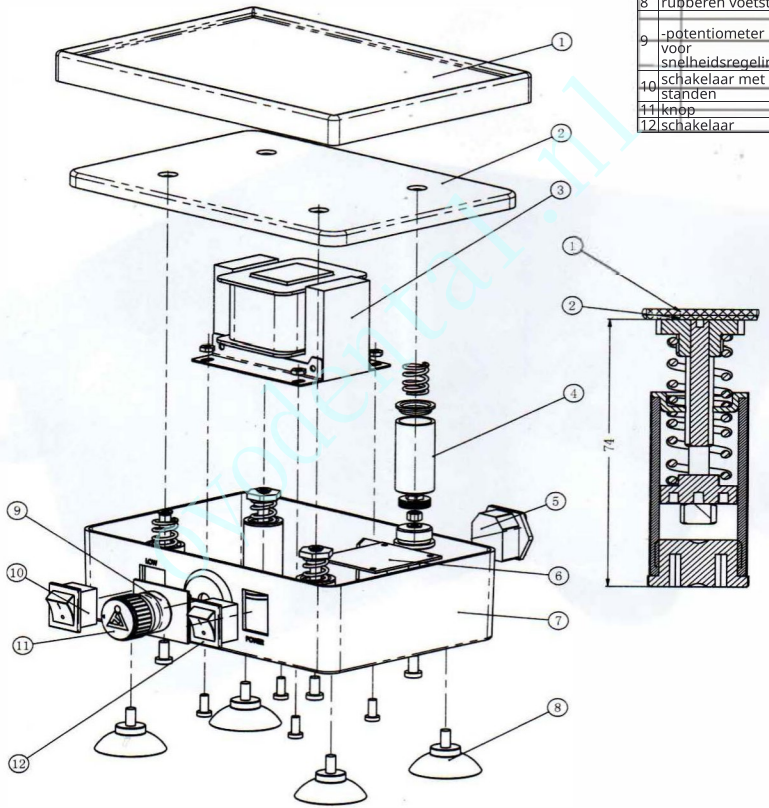

https://www.oyodental.nl/

Tandheelkundige vierkante vibrator, model 'Quartet', laboratoriumapparatuur JT-51B

Kenmerken

Verwarmingsapparaat met twee vermogensstanden: laag en hoog.

Ontwerp van de basis voor warmteafvoer.

Indicatielampje voor de bedrijfsstatus.

Schakelaar voor het selecteren van de vermogensstand.

Specificaties:

Spanning: <A>220 V/50 Hz ±10%
<B>110 V/60 Hz ±10%
Vermogen: 120 W
Maximale belasting: <=2 kg
Afmetingen: 24 × 18 cm × 10 cm

https://www.ovodental.nl/