LED-bleeksysteem

oyodental.nl

Handleiding


Lees de inleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt

Inhoud

1. 【 Samenvatting 】 1
2. 【 Accommodatie 】 1
3. 【Specificaties】 2
4. 【 Beschrijving van de productstructuur en onderdelen } 3
5. 【 Gebruiksaanwijzing van de machine 】 4
6. 【 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 】 5
7. 【 Opslag en transport 】 6
8. 【 Eenvoudige handleiding voor het oplossen van problemen 】 7
9. 【 Paklijst 】 8
10. 【 Service na verkoop 】 9
11. 【 Installatieschema 】 10
12. 【 Symbolische beschrijving 】 11



Opslagomstandigheden: Druk: 50 kPa – 106 kPa

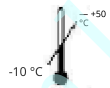

Opslagomstandigheden:
Temperatuur: -10 °C tot +50 °C




Opslagomstandigheden: Luchtvochtigheid: 0 % ~ 80 %



Geen regen/vocht



Voorzichtig behandelen

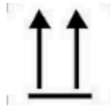

Omhoog

oyodental.nl

https://www.oyodental.nl/

【Symbolische beschrijving】



Let op! Toegang tot de bijgevoegde documentatie



Productiedatum



Alleen voor gebruik binnenshuis



Fabrikant

IPXO Standaarduitrusting




Toepassingsonderdeel van het BF-type



Conformiteit van het product met de WEEE-richtlijn

IPX1 Apparatuur tegen druppelvorming

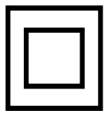

Apparatuur van klasse II

Samenvatting

1. Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen; wij zijn ervan overtuigd dat uw keuze u een goede oogst zal opleveren en uw bedrijf ten goede zal komen.
2. Het bleek-systeem dat door ons bedrijf is vervaardigd, is momenteel het meest geavanceerde merk in China. Het wordt aangestuurd door de microcomputer in de machine en kan het bleekmiddel katalyseren, waardoor een nauwkeurige en effectieve reactie ontstaat die de tanden grondig witter maakt. De golflengte van het uitgezonden blauwe licht ligt tussen 460 en 490 nm en bestraalt alle oppervlakken van de tanden effectief, zodat elke tand witter wordt. Dit is een belangrijke doorbraak op het gebied van tandreiniging en bleektechnologie in de tandheelkunde.
3. De LED beschikt over een functie voor automatische temperatuurregeling zodra de gebruiker de temperatuur heeft ingesteld.
4. Geschikt voor diverse bleeksetten die op de markt verkrijgbaar zijn; als u kiest voor de bleekgel die door ons bedrijf wordt geleverd, zal het bleekresultaat beter zijn.
5. **Raadpleeg voor de werkwijze van de bleekbehandeling de „Technische handleiding voor bleekbehandelingen“. Het bleekeffect na de behandeling wordt beïnvloed door verschillende omstandigheden en hangt voornamelijk af van de kwaliteit van het bleeksysteem en de bleekmiddelen, het vakmanschap en de ervaring van de behandelaar, evenals de individuele verschillen bij de patiënt. Let hier goed op!**

【 Toepassingsgebieden 】

Het door ons bedrijf vervaardigde bleek-systeem wordt gebruikt door tandheelkundige afdelingen in ziekenhuizen, tandheelkundige klinieken, schoonheidssalons, onderwijsinstellingen, instellingen of particulieren voor het bleken van tanden, enz.

Externe oorzaken van verkleuringen van de tanden

1: Externe pigmentvlekken op de tanden (rookvlekken, koffievlekken, theevlekken, enzovoort)

2: Interne pigmentvlekken op de tanden, tetracyclinepigmentatie, dentale fluorose.

3: Erfelijke xanthodontie.

4: Donkere en gele tanden door onbekende oorzaken



Contra-indicatie: Er zijn geen nadelige verschijnselen bij het klinisch gebruik van het product


oyodental.nl

https://www.oyodental.nl/

【Specificaties】

Afmetingen van het frame	Hoogte: 480 mm, Armlengte: 900 mm, Breedte: 1200 mm
Gewicht van de machine	27 kg
Ingangsspanning	AC 100 V~240 V, 50/60 Hz
Uitgangsspanning	18 V DC
Vermogen	60 VA
Golflengte van het blauwe licht	400–460 nm
Dichtheid van blauw licht	300–400 mW/cm²
Witmakende tijd	10-15 minuten per sessie, twee of drie sessies per behandeling.

【Beschrijving van de productstructuur en onderdelen】

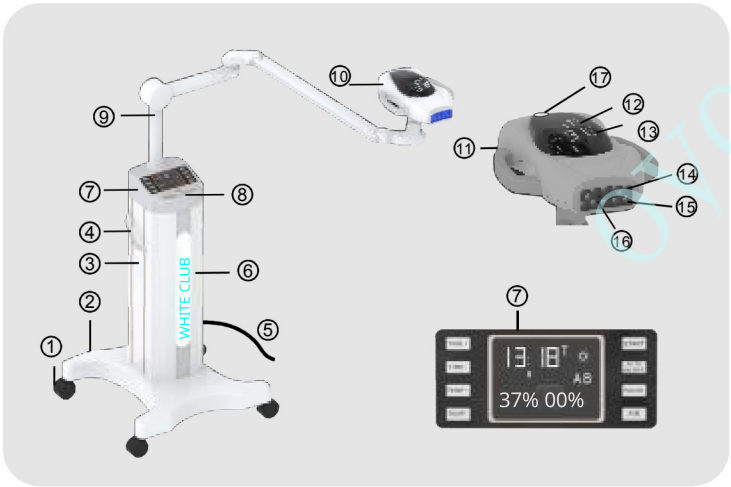


【Installatieschema】




1. Monteer alle 4 de wieltjes in de paardhouder



2. Steek de romp in het gat van het paard.

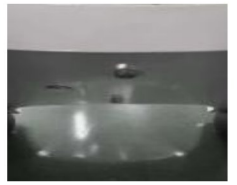

3. Bevestig het lichaam en het voetenbankje met de 2 schroeven uit de verpakking.

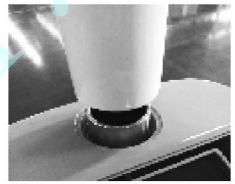

4. Bevestig de verbindingsstang aan de romp en draai de schroeven vast.



5. Verbind de stekker van de draaiarm met de verbindingsstang.



6. Bevestig de draaiarm bovenop de verbindingsstang.



7. Sluit de stekker van het hoofdframe aan op de verbindingsstang van de draaiarm.



8. Monteer het hoofdframe bovenop de draaiarm.

https://www.oyodental.nl/

【Paklijst】

1. Hoofdframe	1 stuk
2. Draaiarm	1 stuk
3. Pilaar	2 stuks
4. Paard	1 stuk
5. Truckle	5 stuks
6. M10-schroef	1 stuk
7. Vaste schijf	1 stuk
8. Φ60 & Φ52 decoratieve kom	1 stuk
9. M4 verzonken kop	2 stuks
10. Draaibare koppeling	1 stuk
11. M4 inbussleutel	1 stuk
12. M5 inwendige zeskant	2 stuks
13. Handleiding	1 stuk
14. Certificaat	1 stuk
15. Garantiekaart	1 stuk
16. Beschermhuls	2 stuks
17. Knipperlicht	2 stuks

【Service na verkoop】

Geachte klanten, lees de handleiding zorgvuldig door voordat u onze producten gebruikt en volg de instructies strikt op tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u het apparaat op de juiste manier gebruikt. Als u problemen of vragen heeft over het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice, een lokale vertegenwoordiger of een distributeur. Wij zullen ons best doen om u te helpen. Bedankt voor uw steun.

Instructies voor de onderdelen:

1. Druppel	2. Ondersteuning	3. Lichaam	4. Handgreep
5. Voedingskabel	6. Logo	7. Bedieningsdisplay	8. Aan/uit-schakelaar
9. Draaiarm	10. Hoofdframe	11. Schakelknop hoofdframe	
12. Temperatuurdisplay	13. Tijdweergave	14. LED-lampjes (groep A)	
15. LED-lampjes (groep B)	16. Temperatuursensor	17. Sensor-pauzeknop	

【Gebruiksaanwijzing van het apparaat】

1. Het bleek systeem moet vóór gebruik worden gemonteerd. Open de verpakking, haal de onderdelen uit de verpakking, verwijder de beschermende lijmfolie en volg vervolgens het elfde deel 【De installatieschets】 in deze handleiding om de apparatuur te monteren en te controleren of alle aansluitdraden correct zijn aangesloten

2. Steek de stekker van het bleekapparaat in het stopcontact en zet vervolgens de hoofdschakelaar van de schakelkast op AAN (ON). Tegelijkertijd gaat het scherm van het apparaat aan en worden alle parameters weergegeven die bij de laatste uitschakeling van het apparaat waren ingesteld. Zie afbeelding 1:



Afbeelding 1

3. Druk op de knop „TIME+“; de weergegeven tijd gaat knipperen, waarna u de tijd kunt instellen. De tijd wordt telkens met 1 minuut verhoogd of verlaagd. Het maximale instelbereik is 30 minuten. Druk ten slotte nogmaals op**„TIME+-“** om de instelling vast te leggen.



Afbeelding 2

4. Druk op de knop “TEMP+”; de weergegeven temperatuur gaat knipperen, waarna u de temperatuur kunt aanpassen. De temperatuur wordt telkens met 1 °C verhoogd of verlaagd. Het maximale instelbereik is 30-40 °C. Druk ten slotte nogmaals op**“TEMP+”**om de instelling vast te leggen.



Afbeelding 3

https://www.oyodental.nl/

5. Wanneer u de “AUTO”-knop uitschakelt, gaat het vermogenslampje knipperen. Pas vervolgens “TEMP+-” aan om het vermogen met 10% te verhogen of te verlagen. Het vermogensbereik loopt van 10% tot 100%.



Pictuter 4

6. Druk op de knop “START”, het bleekapparaat gaat branden en op dat moment werkt het bleekapparaat volgens de ingestelde vereisten, en het scherm toont de resterende werktijd en temperatuur; als u een automatisch proces met constante temperatuur start, kan het apparaat automatisch werken volgens de door u ingestelde temperatuur. Deze functie is identiek aan die van het hoofdapparaat.



Afbeelding 5

7. Druk op de knop**“AUTO (AAN/UIT)**”; het scherm “AUTO”**gaat**knipperen en kan worden in- of uitgeschakeld. Wanneer “AUTO”**is**ingeschakeld, kunt u de temperatuur instellen; wanneer deze is uitgeschakeld, kunt u het vermogen instellen.



Afbeelding 6

8. De “PAUSE”-knop moet werken wanneer de LED-buis brandt. PAUSE is de pauzeknop. Druk één keer op deze knop om het witmaken te pauzeren, druk nogmaals om het proces te hervatten. Hetzelfde geldt voor



Afbeelding 7

【 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Voorkom dat het blauwe licht rechtstreeks in de ogen van mensen schijnt, anders kunnen de ogen ernstig letsel oplopen. Wanneer het bleekapparaat in werking is, moeten zowel de patiënt als de arts een veiligheidsbril dragen om de ogen te beschermen.
2. Bij het verplaatsen van het apparaat moet u het apparaat met één hand vasthouden en de staande steunpilaar met de andere hand ondersteunen, en vervolgens de beugel langzaam verschuiven om de positie van het apparaat aan te passen, om te voorkomen dat het bleekapparaat omvalt en tegelijkertijd te voorkomen dat het statief verschuift.
3. Het bleekapparaat moet vóór de behandeling worden gesteriliseerd.
4. Na gebruik moet de stroomtoevoer tijdig worden uitgeschakeld; vermijd contact met harde voorwerpen of vloeistoffen.
5. Mocht er een probleem optreden bij het gebruik van het bleekapparaat, dan is het verboden om zonder toestemming reparaties uit te voeren; anders kan niet worden gegarandeerd dat het bleekapparaat in goede staat blijft.

【 Opslag en transport 】

1. Om de veiligheid van de producten te waarborgen, moeten we tijdens het transport en het verplaatsen voorzichtig te werk gaan: er mogen geen zware voorwerpen tegen de doos drukken, de stapel mag niet hoger zijn dan vijf lagen en het is ook erg belangrijk voor het behoud van de goederen dat er geen vloeistoffen in de doos terechtkomen.

2. Bewaar bij een temperatuur tussen -10 °C en 40 °C, **in** een corrosievrije, schone **en** goed geventileerde binnenomgeving **met** een relatieve luchtvochtigheid van **30% tot 80** %.

【 Eenvoudige handleiding voor probleemoplossing 】

Soorten storingen	**Oorzaken van de storingen**	**Oplossingen**
Geen weergave	Uitschakelen	Zet de schakelaar uit
Geen uitgang	Zonder de relevante parameters in te stellen	Stel de parameters correct in
Lage helderheid	Er is slechts één groep LED's geselecteerd (alleen A of B)	Selecteer zowel A als B
Lage lichtsterkte	Zonder 100% uitgangsvermogen in te stellen	Uitgangsvermogen op 100% ingesteld
Overige storingen		Neem contact op met onze klantenservice

oyodental.nl

https://www.oyodental.nl/